

# VITA VMK Master®

Stručnost za sve slučajeve



VITA uzimanje boja

VITA komunikacija boja

VITA proizvodnja boja

VITA kontrola boja

Izdanje 01.19



VITA – perfect match.

**VITA**

**Stručnost – za Vaše najbolje rezultate**



## VITA VMK Master®

### Stručnost

#### Preciznost, koju ćete zavoleti. Sa sigurnošću!

Dobro je znati da Vam VITA sa VITA VMK Master nudi preciznu i prirodnu keramiku za fasetiranje, koja za sve klasične legure garantuje maestralne rezultate – bez obzira da li je livena, brušena ili sinterovana.

VITA VMK Master Vam omogućava rezultat sa apsolutnom tačnošću, uz pouzdanost boja kontrolisanog kvaliteta na koju se uvek možete osloniti. Mi, kod VITE, želimo da postignemo isključivo najviše standarde u proizvodnji – VITA mase se proizvode u istoj fabrici, u kojoj se proizvode i svetski poznate VITA classical A1–D4 skale boja i VITA SYSTEM 3D-MASTER skale boja.

Najbolje je da se uverite sami: VITA VMK Master Vam omogućava jednako precizne u i svako doba estetske rezultate – pouzdano, sa briljantnim bojama i za sve slučajeve!



Zirkonzahn, disk od hrom-kobalta

#### Vaše prednosti - ukratko

- Precizno i brzo u obradi, tako da može brzo da se nauči
- Materijal bez kompromisa u pogledu sigurnosti i estetike
- Vrhunske karakteristike obrade, kao što su sposobnost oblikovanja, jednostavno rukovanje i minimalno skupljanje (koje omogućava izradu krunica već kod pečenja)
- Može da se individualizuje sa VITA AKZENT Plus i VITA INTERNO
- Dostupno u bojama VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A1–D4



**Najbolje performanse – uverite se sami**



## Najbolje performanse

### Naše znanje za vašu lepotu

VITA pripada pionirima stomatološke branše. Sav naš razvoj i iskustvo su danas osnova za pružanje najboljih usluga u pogledu materijala i tehnike i postizanja kliničkog uspeha – širom sveta i bez kompromisa.

VITA Zahnfabrik je već pre više od pola veka uspostavila metalkeramički sistem fasetiranja na tržištu – u to vreme, prva u Evropi. Danas smo tu ponudu razvili do savršenstva. Rezultat je pouzdanost procesa, koja je bez premaca.

Pri tome Vam VITA VMK Master dozvoljava raspon upotrebe, sa kojom mogu da se ispune svi zahtevi za keramiku – individualno, sa visokom briljantnošću boja i, naravno, bez kompromisa.



Prirodna fluorescentnost

### Vaše prednosti - ukratko

- Rezultati sa briljantnim bojama, zahvaljujući ubedljivim nijansama boja i prirodnoj fluorescentnosti
- Široke mogućnosti upotrebe, od postizanja jednostavnih ciljeva, do kompleksnih slučajeva pacijenata sa individualnim karakteristikama
- Visoka pouzdanost procesa, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu



Najbolje performanse



**Slika 1a\***

Stare krunice ne odgovaraju ni po boji, ni po stepenu opaciteta ili po obliku, a površinska struktura nije usklađena sa preostalim zubima i deluje nepravilno.



**Slika 1b\***

Nove krunice, kod kojih se svetlost prelama kao kod gleđi, deluju mnogo prirodnije.



**Slika 2a\***

Reprodukcija jako abradiranih zuba zahteva rekonstrukciju svih karakteristika tipičnih za bruksizam.



**Slika 2b\***

Krunica na zubu 11 upravlja se prema prirodnom uzorku (zub 21): oštre incizalne ivice, pukotine, naprsline gleđi, izbrušene fasete, kao i karakteristike boje tipične za starosno doba.

Najbolje performanse



**Slika 3a\***

*Krunica na zubu 22 u odnosu na susedni 21 i naspramni zub 12 deluje kao strano telo.*



**Slika 3b\***

*Nova krunica 22 se svojom intenzivnom osnovnom bojom i efektima gleda harmonično uklapa sa susednim zubima*



**Slika 4a\***

*Boja, oblik i površina zubne nadoknade 22 čini da se odmah vidi da se radi o zubnoj nadoknadi.*



**Slika 4b\***

*Iluzija dubine i živopisno prelamanje svetlosti čine da nova krunica 22 deluje prirodno kao njen susedni zub 21.*

Najbolje performanse



**Slika 5a\***  
Za reprodukciju izraženog opaciteta karakterističnog za uzrast pri izradi rekonstrukcije merodavni su susedni zubi.



**Slika 5b\***  
Zahvaljujući savršenoj reprodukciji opaciteta i fluorescentnosti tipičnih za mlade zube, krunica 12 se savršeno uklapa među ostale zube.



**Slika 6a\***  
U ovom slučaju, uz istovremeni dubinski efekat i izrazitu opalescentnost karakterističnu za mlade zube, poseban zahtev postavlja svetla osnovna boja susednog zuba 21.



**Slika 6b\***  
Novu krunicu 22 karakteriše efekat prirodne dubine, živahna igra boja i neprozirnost tipična za starosno doba.



Najbolje performanse



**Slika 7a\***  
Zub 21 se po svojim karakteristikama ne uklapa po boji, površini i stepenu sjaja sa susednim zubom 11.



**Slika 7b\***  
Metal-keramička krunica 21 se ne prepoznaje kao zubna nadoknada, jer sadrži sve karakteristike njenih prirodnih susednih zuba.



**Slika 8a\***  
Kao uzorak za slomljeni zub 21 poslužio je zub 11 sa svim svojim posebnim karakteristikama: svetlom osnovnom bojom, izraženom translucenčnošću, netaknutim incizalnim ivicama i sedefastim efektom gleđi.



**Slika 8b\***  
Krunica 21 je po boji, kao i po izgledu gleđi, verna kopija susednog zuba sa svim karakteristikama - uključujući sedefasti efekat.

**Precizan – kao i Vaš zahtev**



Precizan


## Uvek za jedan sloj bolji!

Naši stručnjaci u razvoju svakodnevno rade na materijalima koji Vam uz minimalni trud omogućavaju maksimalne rezultate. Na primer, naš opaker sa dobrim razlogom prekriva materijal za skelet već posle jednog pečenja – bez obzira da li se radi o prahu, pasti ili Spray-On tehnici.

Što je primena intuitivnija, to se više možete koncentrisati na odlučujuće detalje. Zato se oslanjamo na klasično standardno nanošenje slojeva. Time ćete od prvog momenta steći iskustvo sa svim prednostima precizne, brze i impresivne obrade.

### Vaše prednosti - ukratko

- Klasično nanošenje slojeva za intuitivno rukovanje
- Prvoklasne karakteristike materijala – kao što su, na primer, smanjeno skupljanje, znatna ušteda vremena i dugotrajna postojanost boja.
- Visoka ekonomičnost i impresivni estetski rezultati

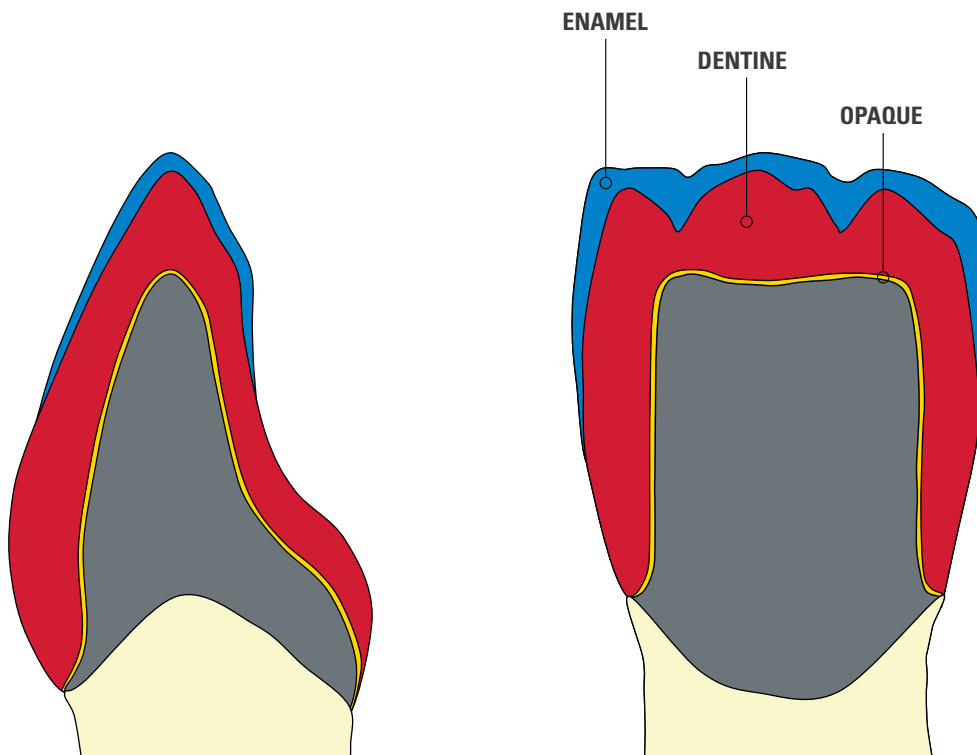

Klasičan način nanošenja slojeva

### Precizan

#### VITA MODELLING FLUID RS za dodatnu vlažnost

Kod nanošenja slojeva eksperti ne daju prednost proizvodu VITA MODELLING FLUID RS (red solution) samo zbog njegove izuzetno dobre postojanosti i manjeg sakupljanja.

Zahvaljujući glatkoj konzistentnosti keramike, uvek imate dovoljno vlage na objektu. To odgovara postupku za nanošenje slojeva „vlažan na vlažan“ i dozvoljava da boje tokom nanošenja prodiru jedna u drugu. To pomaže i da se sa ovim načinom rada postignu efekti difuzije svetla čiji se puni sjaj vidi tek nakon završetka.

#### Vaše prednosti - ukratko

- Odlična postojanost
- Smanjeno sakupljanje
- Duže vreme za obradu



## Precizan

### Za više sigurnosti: VITA NP BOND

Činjenica je: VITA VMK Master Vam na skoro svim legurama bez plemenitih metala nudi visoku toleranciju obrade i iz dobrog razloga se uspešno koristi širom sveta. Ukoliko u fazi hlađenja, usled uslova koje postavlja metal, ipak dođe do neravnomernog KTŠ, VITA NP BOND Paste Vam i ovde nudi neophodnu sigurnost, koju očekujete.

Inovativni Bonder, kao amortizer izjednačava naprezanja koja uslovljava KTŠ i garantuje sigurnu vezu između skeleta i keramike – u svakom trenutku. Bez obzira da li se radi o laserski sinterovanim skeletima, skeletima brušenim CAD/CAM sistemima ili o livenim legurama bez plemenitih metala.

#### Vaše prednosti - ukratko

- Skoro neograničena sigurnost – čak i kod pojedinačnih slučajeva sa specifičnim legurama
- Jednostavna obrada, pouzdano vezivanje i pasta, spremna za upotrebu
- Warmer Goldton za estetske rezultate

Za Vas smo testirali sledeće legure:

<https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond>



Gotova VITA NP BOND Pasta



Topla nijansa osnovne boje za metale




**Varijabilan – i zato svestran**

Varijabilan

## VITA VMK MASTER® izbor asortimana

VITA VMK vam pruža raznolik asortiman koji za skoro svaki zadatak nudi opširan izbor asortimana. Što je sistem bolji, to je šira i mogućnost primene.

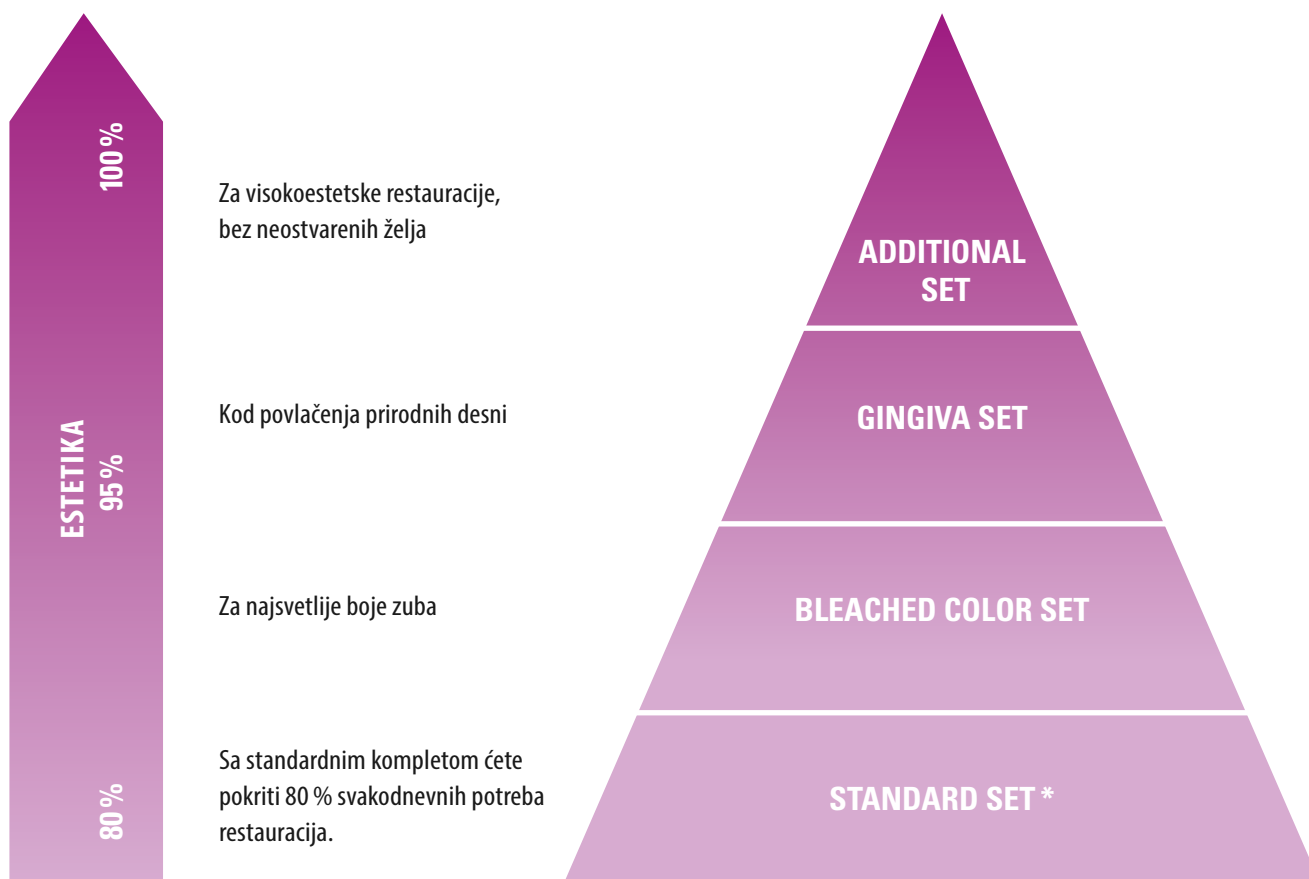

\* STANDARD SET je dostupan u sledećim varijantama:

- STANDARD SET POWDER VITA classical A1–D4
- STANDARD SET PASTE VITA classical A1–D4
- STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER

Varijabilan

VITA VMK Master® MARGIN



Zahvaljujući patentiranom postupku proizvodnje VITA masa za oslonce, keramika za fasetiranje se može obrađivati na način koji zubni tehničari koriste pri radu sa plastičnim materijalima.



VITA VMK Master® LUMINARY



Jako fluorescentne mase, za kontrolu fluorescencije u udubljenjima restauracije.





Varijabilan

VITA VMK Master® DENTINE MODIFIER



Za interno bojenje radi postizanja efekta dubine



VITA VMK Master® CERVICAL



Za pojačavanje efekta dubine



VITA VMK Master® TRANSLUCENT



8 transparentnih nijansi za reprodukciju najrazličitijih transparentnosti prirodne zubne gleđi



Varijabilan

VITA VMK Master® NECK




Sa NECK masama se može dodatno podržati optimalna reprodukcija boja u cervikalnom području.



VITA VMK Master® PEARL / OPAL TRANSLUCENT



Biserni sjaj /  
Za postizanje bisernog efekta kod mladih i transparentnih zuba

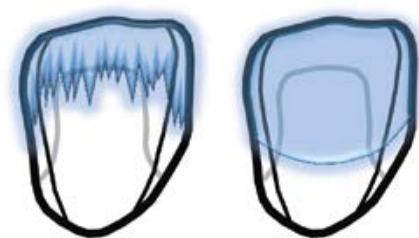

Varijabilan

**VITA VMK Master® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE**



Za preciznu reprodukciju boje kod gubitka mekog tkiva



**VITA VMK Master® WINDOW**




Kristalno prozirna WINDOW masa



VITA VMK Master keramika za fasetiranje je dostupna u VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A1–D4 bojama. Garantuje se kompatibilnost boja sa svim VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITA classical A1–D4 materijalima.

Sa jedinstvenim VITA SYSTEM 3D-MASTER sistematski se određuju i potpuno reprodukuju sve prirodne boje zuba.

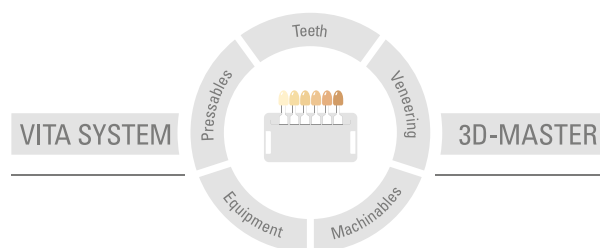

**Pažnja:** Naše proizvode potrebno je koristiti prema uputstvima za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost za štete koje su nastale zbog nepravilnog rukovanja ili obrade. Korisnik je obavezan prije upotrebe provjeriti da li je proizvod prikladan za predviđeno područje primjene. Odgovornost se ne prihvaća kada se proizvod obrađuje u nepovoljnoj, odnosno neodobroj kombinaciji sa materijalima i uređajima drugih proizvođača jer postoji mogućnost neadekvatnih rezultata. VITA Modulbox nije obavezan sastavni dio proizvoda. Datum izdavanja ovih informacija: 01.19

Sa objavljivanjem ovih informacija za upotrebu sva dosadašnja izdanja prestaju važiti. Najaktualniju verziju naći ćete na adresi [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik je sertifikovan i sledeći proizvodi imaju oznaku **CE** 0124:

**VITA VMK Master® · VITA AKZENT® Plus · VITA INTERNO®**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)