

VITA AKZENT® Plus

Информация о продукции



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 01.19

VITA – perfect match.

VITA

Оптимально. Просто. Все есть.
Характеризация, индивидуализация и
глазурирование - независимо от КТП

VITA AKZENT® Plus **Оптимально. Просто. Все есть.**



Больше гибкости в клинике и лаборатории

Вы хотите легко и эффективно индивидуализировать реставрации?
Тогда Ваш выбор - красители VITA AKZENT PLUS.

Система из различных красителей предоставляет врачам-стоматологам и
зубным техникам универсальные возможности при воспроизведении цвета.

Она применима для всех видов облицовочной керамики независимо от КТР.

Новые красители, новые формы применения, новый спектр показаний -
VITA AKZENT Plus всегда предлагает Вам свободу выбора.

Будь то порошок, паста или спрей - Вы сами решаете, в каком виде красители
VITA AKZENT Plus для Вас максимально удобны и экономичны в работе.

VITA AKZENT® Plus SPRAY **Равномерный слой простым нажатием кнопки**



В набор AKZENT Plus SPRAY KIT входят		
Продукт	Цвет	Содержание
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75мл
GLAZE SPRAY		1 x 75мл
GLAZE LT SPRAY		1 x 75мл
Принадлежности		



Подходит для использования в лабораториях, а также в условиях клиники, например, для подкрашивания монокристаллических реставраций.

Готовый к применению аэрозольный керамический порошок для простого и быстрого глазурирования и лазерирования.

Преимущества

- Позволяет нанести равномерный слой, получить идеальный уровень глянца.
- Благодаря новой специальной насадке заметно снижается расход краски.



VITA AKZENT® Plus POWDER **сочетает в себе гибкость и индивидуальность с экономичностью**



В набор AKZENT Plus POWDER KIT входят		
Продукт	Цвет	Содержание
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3г
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3г
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3г
GLAZE		1 x 5г
GLAZE LT		1 x 5г
FINISHING AGENT		1 x 5г
POWDER FLUID		1 x 20мл
Принадлежности		

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master входят		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4г
POWDER FLUID		1 x 20мл

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1–D4 входят		
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 4г
POWDER FLUID		1 x 20мл



При помощи порошкообразных красителей VITA AKZENT Plus POWDER зубные техники могут выполнять индивидуализацию реставраций, покрытых классическими облицовочными материалами и мелкодисперсной керамикой на основе полевого шпата.

Преимущества

- Для максимального удобства и экономичности
- Для создания индивидуальных цветовых нюансов порошки легко смешиваются между собой
- быстрая и простая интеграция цветового оттенка и интенсивности.

VITA AKZENT® Plus PASTE **Очень быстро. Индивидуально.**



AKZENT Plus PASTE KIT		
входят		
Продукт	Цвет	Содержание
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4г
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4г
GLAZE PASTE		1 x 4г
GLAZE LT PASTE		1 x 4г
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4г
PASTE FLUID		1 x 15мл
Принадлежности		

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master		
входят		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CS10	5 x 4г
PASTE FLUID		1 x 15мл

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4		
входят		
CHROMA STAINS PASTE	CSA – CSD	4 x 4г
PASTE FLUID		1 x 15мл



Пастообразные красители VITA AKZENT Plus PASTE оптимально подходят для быстрой и простой индивидуализации реставраций, например, из VITABLOCS.

Преимущества


- готовые к применению пасты с неизменной консистенцией и однородной пигментацией для быстрого применения
- для создания индивидуальных цветовых эффектов пасты легко смешиваются между собой
- разбавляемые и повторно смешиваемые
- быстрая и простая интеграция цветового оттенка и интенсивности.



Жидкость VITA AKZENT Plus PASTE FLUID обеспечивает оптимальную консистенцию, в случае если пасты высохли или подсохли.



AKZENT Plus Ассортимент						
Ассортимент						
Продукт	Образец	Цвет	Наименование	Форма выпуска		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – транслюцентные красители – для индивидуального окрашивания базисного материала		желтый	BS01	✓	✓	✓
		желто-коричневый	BS02			
		оранжевый	BS03			
		оливково-серый	BS04			
		серо-коричневый	BS05			
CHROMA STAINS classical A1–D4 – красители для изменения цветового эффекта базисного материала внутри одной цветовой группы		Красновато-коричневые	CSA		✓	✓
		Красновато-желтые	CSB			
		сероватый	CSC			
		серовато-красный	CSD			
CHROMA STAINS 3D-Master – красители для изменения цветового эффекта базисного материала внутри одной группы светлоты		желтоватый	CSL		✓	✓
		Желтовато-красный	CSM2			
		желто-красный	CSM3			
		красноватый	CSR			
		оранжевый	CSIO			
EFFECT STAINS – маркирующие, равномерно распределяющиеся красители – для создания естественных поверхностных эффектов – для колорирования во время послойного построения		белый	ES01			
		кремовый	ES02			
		лимонно-желтый	ES03			
		солнечно-желтый	ES04			
		оранжевый	ES05			
		ржавый	ES06			
		хаки	ES07			
		розовый	ES08			
		темно-красный	ES09			
		лиловый	ES10			
		голубой	ES11			
		серо-голубой	ES12			
		серый	ES13			
		черный	ES14			
GLAZE – для создания равномерных, глянцевых поверхностей				✓	✓	✓
GLAZE LT – легкоплавкая (низкотемпературная) масса для глазуровки реставраций, облицованных керамикой, у которой температура спекания ниже 800 °С				✓	✓	✓
FINISHING AGENT – для шелковисто-матовых поверхностей					✓	✓

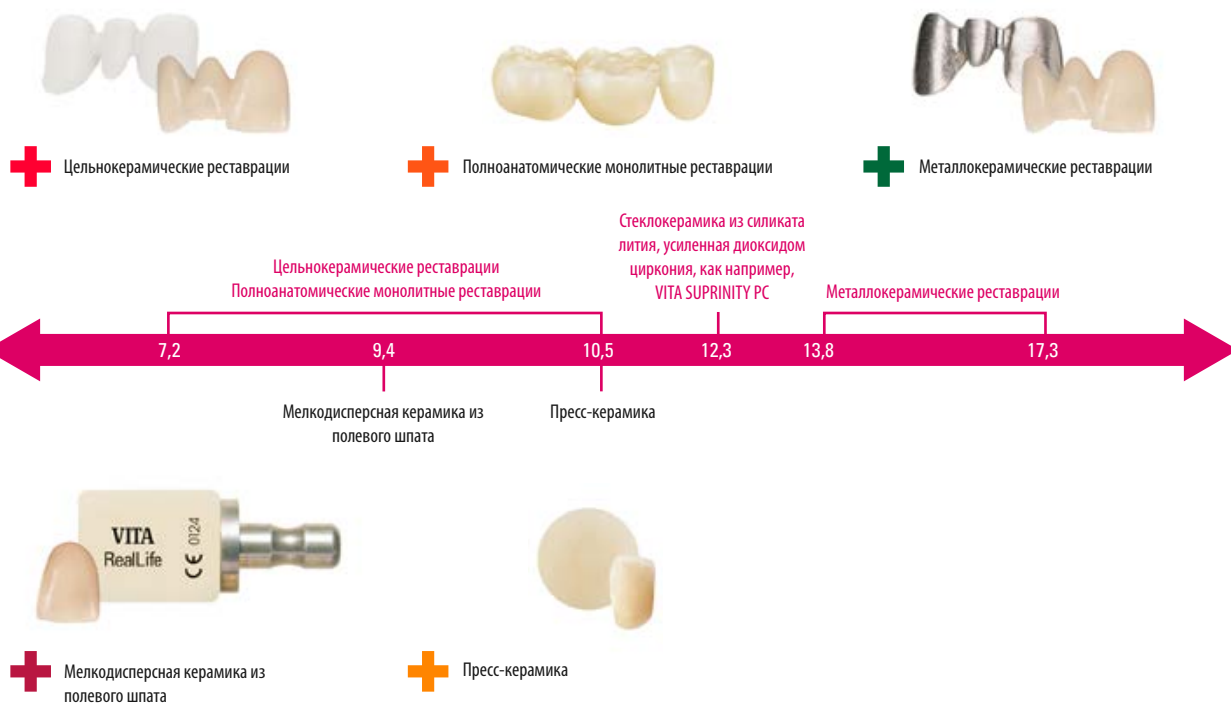

+ Плюс в универсальности

Характеризация

Новинка в облицовочной системе: транслюцентные красители Body Stains выполняют функцию цветового фильтра.

Они идеально подходят для:

- Окрашивания поверхностей
- Изменения цвета базисного материала

Индивидуализация

Особая мелкодисперстная структура: красители Effect Stains отличаются прежде всего:

- Интенсивностью цвета
- Высокой покрывной способностью

В особенности они рекомендуются для создания естественных цветовых эффектов и внутреннего колорирования.

Глазурование


Для глянцевого блеска:

- VITA AKZENT Plus GLAZE - глазуровочная масса для создания равномерной глянцевой и стекловидной поверхности
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT - легкоплавкая (низкотемпературная) масса для глазуровки реставраций, облицованных керамикой, у которой температура спекания ниже 800 °C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – глазуровочная масса для шелковисто-матовых поверхностей

+ Плюс в удобстве применения

Все красители флуоресцентные, исключительно мелкодисперстные и цветостабильные. Кроме того, тиксотропные свойства порошка и пасты способствуют прецизионному нанесению соответствующих масс.

С помощью уникальной цветовой шкалы VITA SYSTEM 3D-MASTER все цвета естественных зубов систематизированно определяются и точно воспроизводятся.

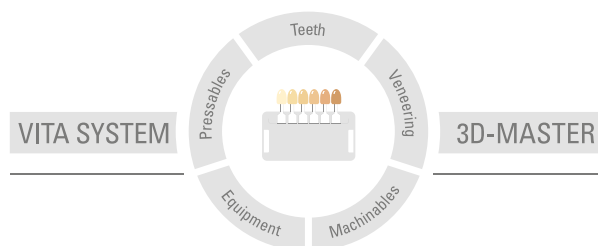

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 01.19

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку **CE 0124**:

VITA AKZENT® Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik