

# VITAPM®9

## Información de producto



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 01.19

VITA – perfect match.

**VITA**

Sistema de cerámica prensada VITAPM®9

Sistema de personalización VITAVM®9 ADD-ON

## VITAPM<sup>®</sup>9 Confección racional garantizada



### VITAPM<sup>®</sup>9: cerámica prensada “todo en uno” para disfrutar de mayor rentabilidad

VITA PM 9 (Pressable Material) es una cerámica prensada “todo en uno” basada en la cerámica de recubrimiento de estructura fina VITA VM 9, acreditada en millones de casos clínicos. VITA PM 9 puede aplicarse en una amplia gama de indicaciones. Es adecuada tanto para la técnica de prensado sin estructura (inlays/onlays, carillas y coronas de dientes anteriores) como para el sobreprensado de estructuras de dióxido de circonio. El surtido de colores, claramente estructurado, incluye tres niveles de translucidez (O, T, HT) con 10 variantes cromáticas cada uno.

#### Las ventajas

- Confección racional: la amplia gama de indicaciones (técnica de prensado sin estructura y técnica de sobreprensado) de VITA PM 9 permite confeccionar de forma rentable y segura las más diversas restauraciones, utilizando un programa de prensado idéntico y manteniendo al mismo tiempo un almacenamiento eficiente.
- Seguridad clínica: la cerámica VITA PM 9 ha sido desarrollada a partir de la acreditada cerámica de recubrimiento de estructura fina VITA VM 9 y garantiza, por lo tanto, la máxima seguridad clínica.
- Juego cromático natural: especialmente las pastillas VITA PM 9 HT, de gran translucidez, convencen por su efecto camaleónico y aseguran un efecto cromático totalmente natural.
- Propiedades típicas del diente natural: las características dentales naturales de la cerámica VITA PM 9 se muestran, por ejemplo, en las superficies homogéneas, la elevada resistencia a la placa y el comportamiento similar al del esmalte.

#### El surtido de colores

El surtido de colores, claramente estructurado, con 10 variantes cromáticas en tres niveles de translucidez distintos (O = Opaque, T = Translucent, HT = High Translucent), permite confeccionar prótesis muy estéticas.

VITA PM 9 es compatible con el sistema de colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Tabla de colores de las pastillas O/T:



	Variantes de color
Pastillas O	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P y 3M3P
Pastillas T	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P y 3M3P

Tabla de colores de las pastillas HT:

	Variantes de color
Colores de dentina	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Colores de esmalte	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

#### La compatibilidad del sistema

La cerámica de prensado VITA PM 9 puede utilizarse en combinación con cualquier sistema de revestimiento y con todos los hornos de prensado de cerámica convencionales.

## VITAVM<sup>®</sup>9 ADD-ON Estética dental natural garantizada

### VITAVM<sup>®</sup>9 ADD-ON : materiales de personalización para conseguir una estética excelente

Ahora están disponibles los materiales VITA VM 9 ADD ON de bajo punto de fusión para la personalización (técnica de estratificación) de restauraciones de VITA PM 9 sin estructura. Los materiales se han desarrollado a partir de la acreditada cerámica de recubrimiento VITA VM 9. Se suministran en ocho matices cromáticos diferentes. De esta forma el protésico puede reproducir de forma rápida y segura tonalidades cromáticas personales y conseguir una estética dental de primera categoría.



### Las ventajas

- Efecto cromático natural: gracias a su excelente translucidez, su refracción de la luz similar a la del esmalte y su unión armoniosa con la matriz básica de VITA PM 9, los materiales VITA VM 9 ADD ON proporcionan un juego cromático natural.
- Seguridad de unión: los materiales VITA VM 9 ADD-ON están adaptados de forma óptima a la cerámica VITA PM 9 y convencen por su excelente unión por sinterización sin deformación con la base de VITA PM 9. Con ello se garantiza una capacidad de carga a largo plazo.
- Rentabilidad: la excelente estabilidad durante la estratificación, la mínima tendencia a la contracción y una impecable estabilidad de cocción garantizan un proceso de confección racional.
- Facilidad de manipulación: los materiales VITA VM 9 ADD ON convencen por su matriz homogénea, que garantiza unas buenas propiedades de desbastado y pulido.



### El surtido de colores

Materiales de esmalte / transparentes	ADD1 (transparente), ADD2 (esmalte claro), ADD3 (esmalte oscuro), ADD4 (blanquecino transparente)
Materiales translúcidos	ADD5 (amarillento translúcido), ADD6 (naranja translúcido), ADD7 (rojo translúcido), ADD8 (azul translúcido).

### La compatibilidad del sistema


Los materiales VITA VM 9 ADD ON se han desarrollado especialmente para la personalización de restauraciones de VITA PM 9 sin estructura. Los materiales de bajo punto de fusión pueden cocerse en todos los hornos de cerámica habituales en el mercado a 800 °C, siguiendo las instrucciones de uso.

### Maquillajes VITA AKZENT Plus: optimizados. Fáciles. Para todo.

Con 28 colores, VITA AKZENT Plus ofrece a clínicas y laboratorios un sistema integral con múltiples posibilidades para la modificación del color. Con VITA AKZENT Plus no solo pueden caracterizarse restauraciones de VITA PM 9, sino que los maquillajes también están indicados para todos los demás materiales cerámicos dentales, independientemente del CET de la restauración. Mediante estos nuevos maquillajes fluorescentes resulta sencillo colorear y barnizar con una capa fina las restauraciones tanto internamente durante la estratificación como superficialmente. Los maquillajes VITA AKZENT Plus están disponibles en forma de polvo y como pastas listas para usar, adaptándose así a distintos campos de aplicación y preferencias de elaboración. Los materiales Body Stains, de aplicación en capa fina, y Glaze están disponibles también como spray.



El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

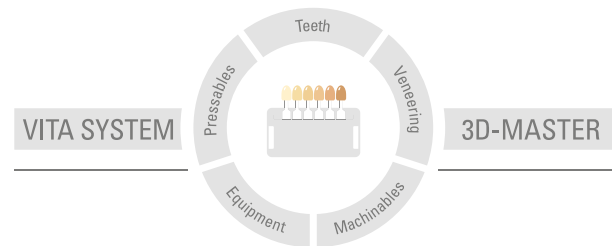

**Nota importante:** nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 01.19

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado **CE 0124**.

VITAVM<sup>®</sup>9 · VITAPM<sup>®</sup>9 · VITA AKZENT<sup>®</sup> Plus

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)