

VITAPM®9

Termékismertető



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2019.01.

VITA – perfect match.

VITA

VITAPM®9 Préskerámia rendszer

VITAVM®9 ADD-ON Individualizáló rendszer

VITAPM®9 – racionális megmunkálást biztosít



VITAPM®9: „All-in-One“ préskerámia a gazdaságosság fokozására

VITA PM 9 (Pressable Material = Préselhető anyag) egy „All-in-One“ préskerámia, amely a milliószorosan bevált VITA VM 9 finomszerkezetű leplező kerámián alapul. VITA PM 9 széles indikációs területen teszi lehetővé a gazdaságos fogpótlást. Alkalmazható vázmentes prés technikához (inlay/onlay, veneer és frontfogkorona), ugyanakkor cirkónium-dioxid vázakra is rápréselhető. Az áttekinthető színkínálat három transzlucens árnyalatot (O, T, HT) tartalmaz, egyenként 10 színváltozattal.

Előnyök

- Racionális előállítás: VITA PM 9 széles indikációs spektruma (vázmentes prés technika és rápréseléses eljárás) különböző fogpótlások gazdaságos és biztonságos elkészítését teszi lehetővé azonos présprogrammal, hatékony készletgazdálkodás mellett.
- Klinikai biztonság: VITA PM 9 kerámiát a milliószorosan bevált VITA VM 9 finomszerkezetű kerámia alapján fejlesztették ki, garantálva ezzel a maximális klinikai biztonságot.
- Természetes színjáték: Különösen a kiemelkedően transzlucens VITA PM 9 HT pelletek meggyőzőek kaméleon hatásuk miatt, ami abszolút természetes színhatást biztosít.
- Fogra jellemző tulajdonságok: VITA PM 9 kerámiának a természetes fogra jellemző sajátosságai például a homogén felületben, a plakkkal szembeni ellenállóképességben, valamint az anyag zománchoz hasonló viselkedésében mutatkoznak meg.

Színkínálat

Az áttekinthető színkínálat három különböző transzlucencia fokozatban (O = opak, T = transzlucens, HT = kiemelkedően transzlucens), egyenként 10 színváltozattal kiemelkedő esztétikájú fogpótlások készítését teszi lehetővé.

VITA PM 9 tökéletes összhangban van a VITA SYSTEM 3D-MASTER színrendszerrel.

Színáttekintés O-/T-pelletek:



	Színvariációk
O-pelletek	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P és 3M3P
T-pelletek	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P és 3M3P

Színáttekintés HT-pelletek:

	Színvariációk
Dentin színek	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Zománc színek	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

Rendszerkompatibilitás

VITA PM 9 anyag a kereskedelemben kapható összes beágyazó rendszerrel és kerámia préskályával megmunkálható.

VITAVM®9 ADD-ON – természetes esztétikát biztosít

VITAVM®9 ADD-ON : Individualizáló masszák csúcseztétikához

Az alacsony olvadáspontú VITA VM 9 ADD-ON masszákat kifejezetten a vázmentes VITA PM 9 fogpótlások individualizálásához (rétegtechnika) szánták. A masszákat a bevált VITA VM 9 leplező kerámia alapján fejlesztették ki. Nyolc különböző színárnyalatban kaphatók. A fogtechnikusok így gyorsan és biztosan tudnak egyedi színárnyalatokat kialakítani, ezáltal elsőosztályú esztétikai eredményt érnek el.



Előnyök

- Természetes színhatás: a VITA VM 9 ADD-ON masszák kiváló transzlucenciát, a zománchoz hasonló fénytörést és harmonikus kötést hoznak létre VITA PM 9 bázis szerkezetével, ami természetes fényjátékot biztosít.
- Biztonságos kötés: a VITA VM 9 ADD-ON masszákat optimálisan összehangolták a VITA PM 9 kerámiával, amit bizonyít a kitűnő, deformációmentes szinterkötés a VITA PM 9 bázissal. Ez egyben tartós terhelhetőséget biztosít.
- Gazdaságosság: a rétegtechnikánál megmutatkozó kiváló szilárdság, a minimális zsugorodás és az elsőrangú égési stabilitás racionális megmunkálási folyamatot biztosít.
- Egyszerű feldolgozás: VITA VM 9 ADD-ON masszák szerkezete homogén, ennek köszönhetően jól csiszolhatók és polírozhatók.



Színkínálat

Zománc-/ Transzparens masszák	ADD1 (transzparens), ADD2 (zománc, világos), ADD3 (zománc, sötét), ADD4 (fehéres transzparens)
Transzlucens masszák	ADD5 (sárgás transzlucens), ADD6 (narancs transzlucens), ADD7 (vörös transzlucens), ADD8 (kék transzlucens)

Rendszerkompatibilitás


A VITA VM 9 ADD-ON masszákat kifejezetten a vázmentes VITA PM 9 fogpótlások individualizálásához fejlesztették ki. Az alacsony olvadáspontú masszák a feldolgozási útmutatóban leírtaknak megfelelően 800°C-on, az összes kereskedelemben kapható kerámiakályhában kiégethetők.

VITA AKZENT Plus festékek: Optimális. Egyszerű. Komplet.

A 28 színnel VITA AKZENT Plus átfogó rendszert nyújt rendelők és laborok számára, amellyel a legkülönbözőbb színváltozatok kialakítására van lehetőség. VITA AKZENT Plus használatával nem csak a VITA PM 9 fogpótlások karakterizálhatók; ezek a festékek az összes fogászati kerámiához alkalmazhatók, függetlenül a fogpótlás hőágulási együtthatójától. Ezekkel az új fluoreszkáló festékekkel egyszerűen végezhető a fogpótlások belső színezése rétegfelépítéskor és a felszínen egyaránt, egyúttal finom lazúr kialakítására is alkalmasak. A VITA AKZENT Plus festékek az előnyben részesített feldolgozási módnak és alkalmazási területnek megfelelően por és használatra kész paszta formájában is kaphatók. A lazúros Body Stains és Glaze anyagok spray formában is elérhetőek.



Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamilyen természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és tökéletesen reprodukálható.

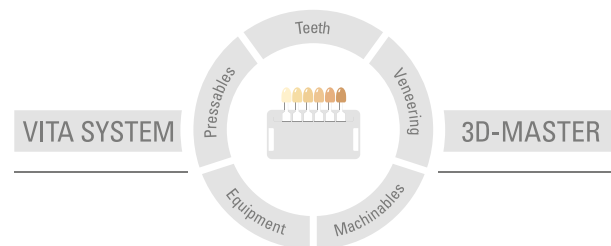

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2019.01

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és az alábbi termékek viselik a **CE 0124** jelzést:

VITA **VM®9** · VITA **PM®9** · VITA **AKZENT® Plus**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 · Fax +49 (0) 7761 / 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 · Fax +49 (0) 7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik