


VITA Easyshade® V

Оптимално определяне на цвета, максимална сигурност

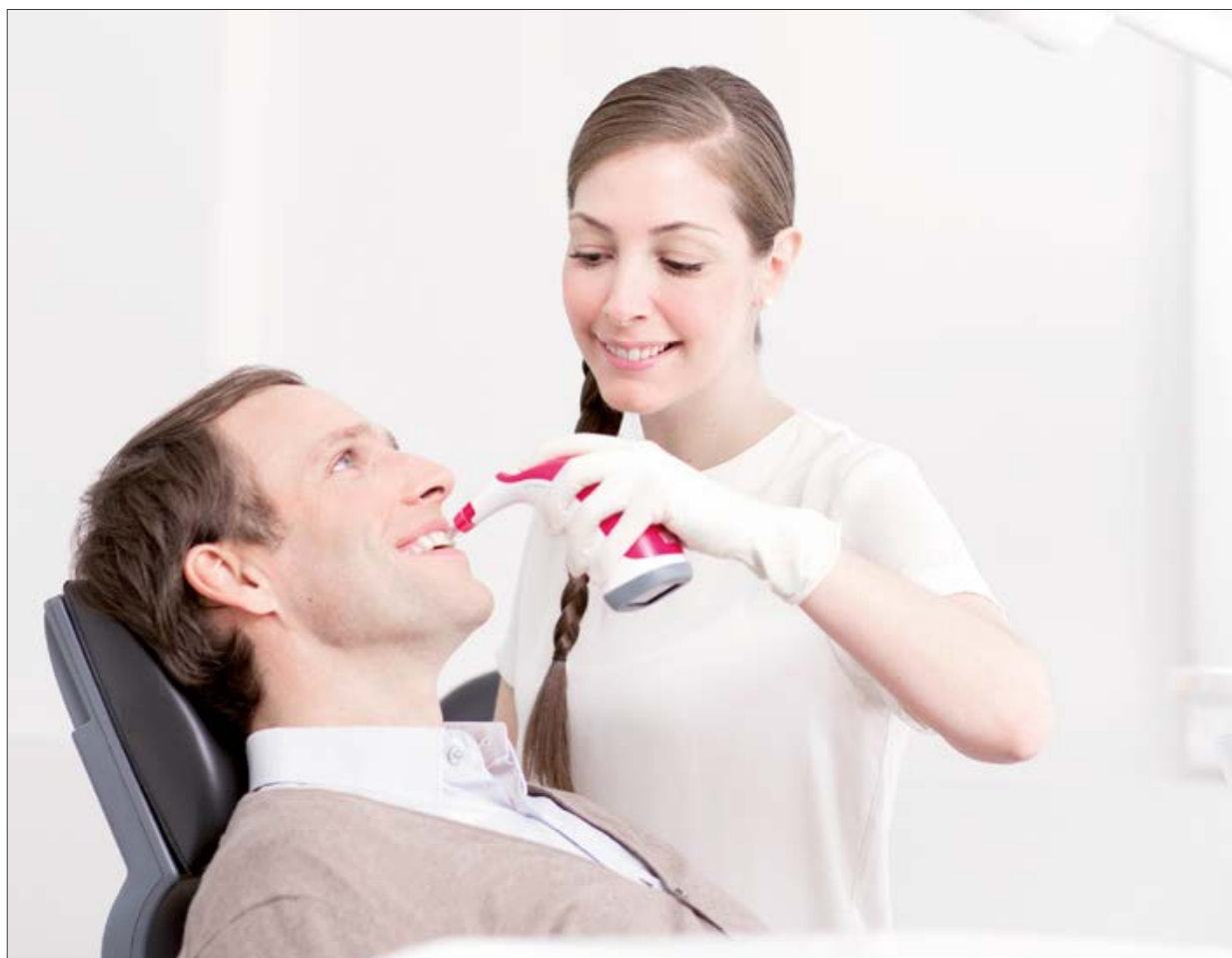

VITA определяне на цвят

VITA комуникация на цвят

VITA възпроизвеждане на цвят

VITA контрол на цвета

Редакция 06.19



VITA – perfect match.

VITA

„ЕФЕКТИВНО определяне и комуникиране на цвят
е възможно само ДИГИТАЛНО – най-добре с VITA Easyshade® V.“

Дентален лекар Philipp Grohmann



VITA Easyshade® V

Най-прецизно определяне на цвят. Сигурно възпроизвеждане на цвят

VITA Easyshade V е дигитален уред за прецизно, бързо и надеждно измерване на цвета на естествени зъби, както и на облицовани керамични възстановявания.

VITA Easyshade V е в помощ на денталните лекари и зъботехници от процеса на определяне и комуникация на цвета на зъба, през възпроизвеждането му, до проверката на цвета на готовото керамично възстановяване, като по този начин подобрява сигурността на процеса.

VITA Easyshade V

- **надеждни, прецизно изчислени цветови информации за зъби**
благодарение на интелигентна, обективна измервателна техника
- **пестящо време и разходи определяне на цвят в рамките на секунди**
чрез получаване на резултати от измерване само с едно натискане на бутон
- **сигурно определяне на материал и възпроизвеждане на цвят**
посредством точни и детайлни информации за цвета на зъба
- **лесно предаване на информация за цвета на зъба и дентални снимки**
към лабораторията, благодарение на софтуер или приложения



VITA Easyshade® V

Един уред. Многостранни възможности за употреба.

VITA Easyshade V предлага на денталните практики и зъботехническите лаборатории ефективна и надеждна помощ при

- прецизното определяне на цвят на естествени зъби и облицовани възстановявания
- оптимален избор на най-подходящ материал за възстановяването
- професионалното планиране и документиране при избелване на зъби
- проверка на качеството на целевия цвят при наслоени керамични възстановявания
- безпроблемна връзка между денталната практика и зъботехническата лаборатория

Детайли за продукта

- компактен ергономичен спектрофотометър със сензорен дисплей и интуитивно меню
- модерна измервателна техника за определяне на основния цвят и цветовете в отделните зони на зъба
- получаване на резултати в рамките на цветовите стандарти VITA, както и показване на избелени цветове съгласно American Dental Association (Американска Дентална Асоциация)
- показване на лабораторни и LCh-стойности
- Bluetooth-интерфейс за безжична връзка с необходимия компютърен софтуер и приложения



VITA mobileAssist.

Най-лесният начин цветовете да комуникират мобилно.


Благодарение на практичното приложение VITA mobileAssist, предаването на информация за цвета на зъба между клиниката и лабораторията става лесно и ефективно. Посредством вътрешния Bluetooth - интерфейс данните от VITA Easyshade V могат да се прехвърлят безжично в приложението, където се комбинират със снимка на пациента и могат да бъдат изпратени с електронна поща. Всички важни информации, относно цветовете на зъби и снимки на пациенти, могат да бъдат изпращани лесно и удобно чрез мобилни устройства като смартфони и планшети.



VITA Assist.

Професионална комуникация и документация на зъбния цвят за клиниката и лабораторията.


Windows-базирания компютърен софтуер VITA Assist позволява професионално документиране и управление на стоматологични находки и информации за цвета на зъбите. VITA Assist дава възможност за интегриране на резултатите от измерванията на VITA Easyshade V в цифрови снимки на пациенти и предлага допълнителни инструменти за редактиране на изображения, както и широк спектър от функции за коментари. С помощта на банката данни можете да управлявате всеки отделен пациентски случай и ефективно да обменяте информация между клиника и лаборатория.

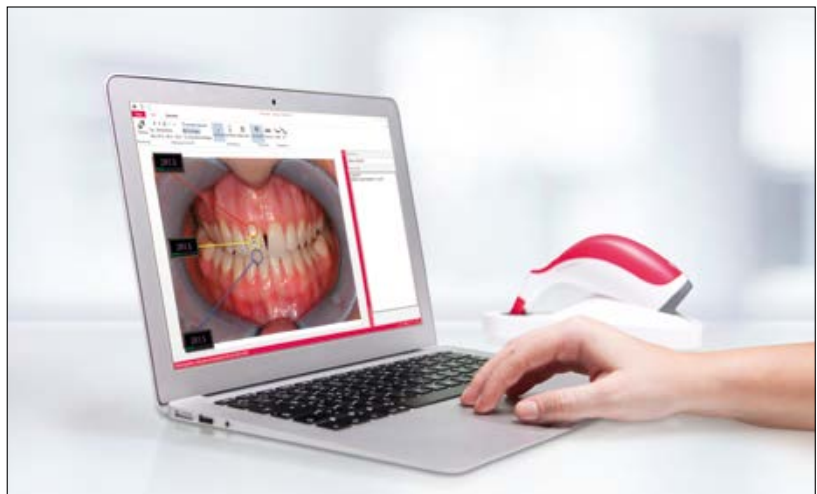


Един уред. Безбройни приложения.




Определяне на основен цвят при избора на материали за директната obtуровъчна терапия

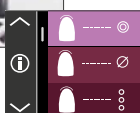


Определяне на цвят при избелване на зъби

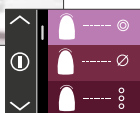


Определяне на осреднен цвят при многохроматични зъби

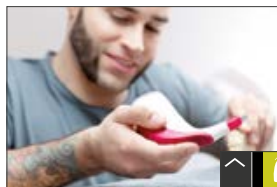

Определяне цвета на възстановяване по време на неговото изграждане

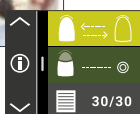


Интраорално определяне на цвят на налични керамични възстановявания

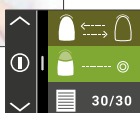


Комуникация чрез приложението VITA mobileAssist App


Определяне на основен цвят при избора на зъби за протези

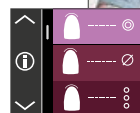

Определяне на цвят при избора на CAD/CAM материали

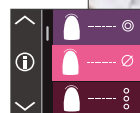

Определяне цвета на зона от зъба при изработване на наслоени керамични възстановявания

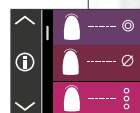

Проверка на качеството по отношение точността на цвета на готови керамични реставрации



Комуникация чрез VITA Assist




VITA системи.

Най-добри решения за процеса на обработване



Указание „Optionale Prozessschritte/Brandführung (Опционални етапи в процеса/управлението на печенето): Материалите фелдшпатна и хибридна керамика могат след изрязване и полиране да бъдат вградени директно. Следователно за фелдшпатната керамика горепосочените етапи на работа са опционални. Принципно за хибридна керамика важи същото, при което не трябва да се извършва печене. При циркониевия диоксид преди характеризирание / индивидуализиране се извършва синтеровъчно печене.

С уникалната VITA SYSTEM 3D-MASTER® всички естествени цветове на зъби се определят систематично и се възпроизвеждат изцяло.

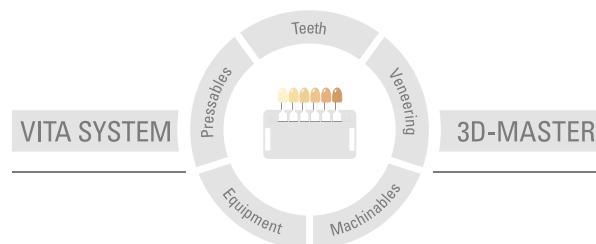

Да се има предвид: Нашите продукти трябва да се използват съгласно данните за употреба. Не поемаме отговорност за щети, които произтичат от некомпетентно боравене или обработка. Потребителят се задължава преди употреба да провери продукта за неговата пригодност за предвидената област на използване. Отговорност от наша страна е изключена, когато продуктът се обработва в недоговорено, съответно непозволено съчетание с материали и устройства на други производители, вследствие на което е възникнала щета. VITA Modulbox не е задължителна съставна част на продукта. Издаване на тази информация за потребителя: 06.19

С издаването на това Ръководство за работа, всички предишни издания губят своята валидност. Валидната в текущия момент версия ще намерите на електронен адрес www.vita-zahnfabrik.com

VITA Easyshade® V има CE обозначение по смисъла на директивата на ЕС 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2011/65/EG.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik