


# VITA Easyshade® V

Determinación óptima del color, seguridad máxima

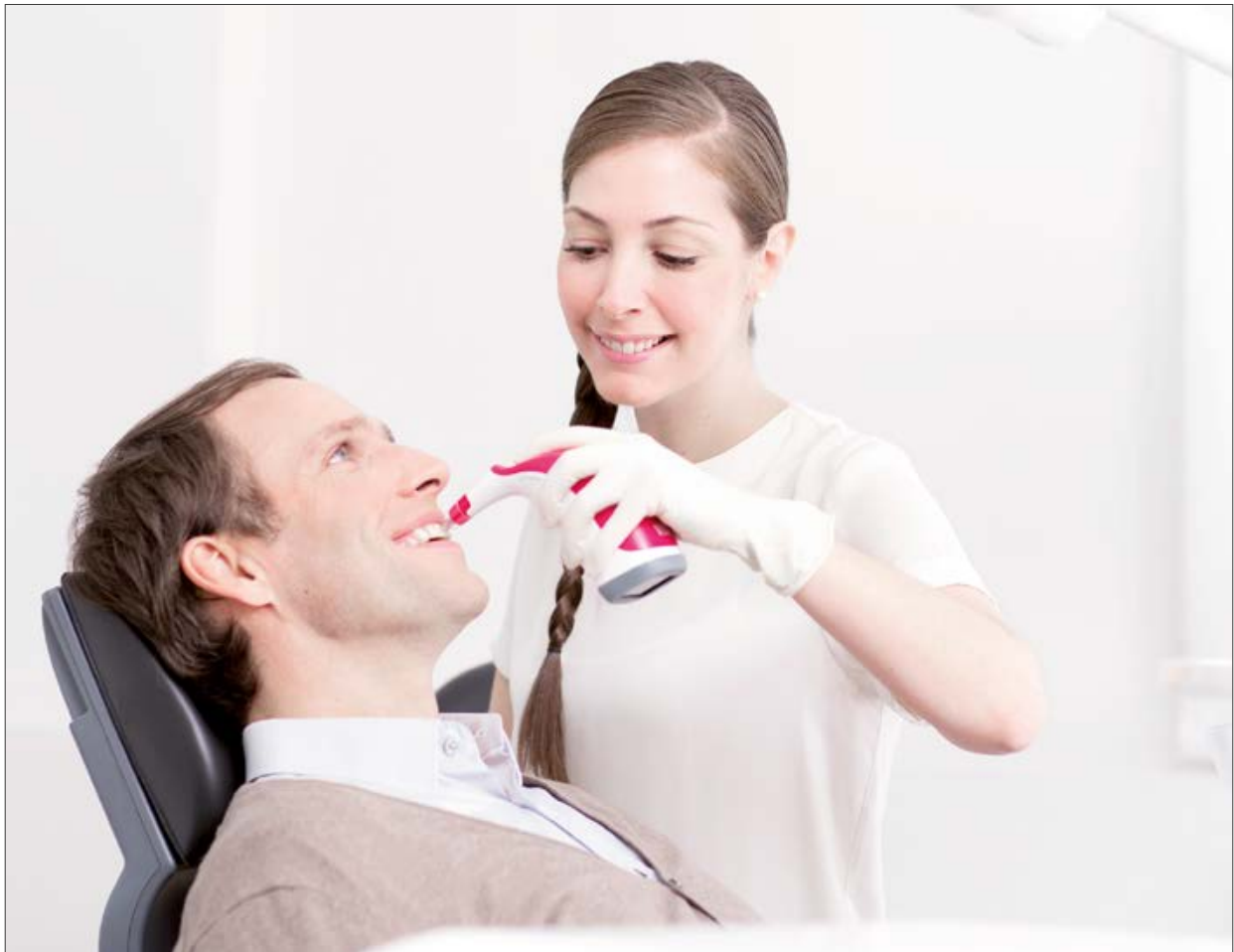

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 04.19



VITA – perfect match.

**VITA**

“La determinación y la comunicación rentables del color dental requiere la tecnología digital, preferentemente mediante VITA Easyshade® V.”

*Dr. en Odontología Philipp Grohmann (protésico dental)*



## VITA Easyshade® V

### Determinación del color altamente precisa. Reproducción del color fiable.

VITA Easyshade V es un espectrofotómetro digital para la determinación del color dental precisa, rápida y fiable en dientes naturales y en restauraciones cerámicas recubiertas.

El VITA Easyshade V brinda su apoyo a odontólogos y protésicos desde la determinación y comunicación del color dental hasta su reproducción, pasando por el control del color en la restauración de cerámica terminada, y de este modo aumenta la seguridad del proceso.

#### **VITA Easyshade V**

- **Información fiable sobre el color dental obtenida de forma precisa** gracias a la tecnología de medición inteligente y objetiva.
- **Determinación del color rápida y económica en segundos** gracias a los resultados de medición con solo pulsar un botón.
- **Elección del material y reproducción del color seguras** gracias a la información exacta y detallada sobre el color dental.
- **Transmisión sencilla de información sobre el color dental e imágenes** al laboratorio mediante software o aplicación.



# VITA Easyshade® V

## Un aparato. Múltiples aplicaciones.

VITA Easyshade V brinda a clínicas dentales y laboratorios un apoyo eficiente y fiable para:

- La determinación precisa del color de dientes naturales y restauraciones recubiertas
- La elección óptima de los materiales de restauración adecuados
- La planificación y la documentación profesionales de tratamientos de blanqueamiento
- El control de calidad de restauraciones cerámicas estratificadas en cuanto al color dental deseado
- La comunicación fluida entre la clínica y el laboratorio

### Detalles del producto

- Espectrofotómetro compacto y ergonómico con pantalla táctil de uso intuitivo
- Tecnología de medición avanzada para determinar el color dental básico y los colores de zonas concretas del diente
- Resultados en los estándares de colores VITA y, en el caso de colores blanqueados, conforme a la American Dental Association (ADA)
- Indicación de los valores Lab y LCh
- Interfaz Bluetooth para la comunicación inalámbrica mediante el software y la aplicación correspondientes



## VITA mobileAssist.

El método sencillo para la comunicación móvil de colores dentales.


Con la práctica aplicación VITA mobileAssist, la transmisión de información sobre el color dental entre la clínica y el laboratorio es sencilla y eficiente. La interfaz Bluetooth interna permite transmitir inalámbricamente los datos del VITA Easyshade V a la aplicación, combinarlos allí con una fotografía del paciente y enviarlos por correo electrónico. De este modo resulta posible enviar de manera móvil y cómoda, mediante el smartphone o la tableta, toda la información relevante sobre el color dental, así como fotografías del paciente.



## VITA Assist.

Comunicación y documentación profesionales del color dental para la clínica y el laboratorio.


Con el software VITA Assist para PC basado en Windows, se pueden documentar y gestionar profesionalmente los diagnósticos odontológicos y la información sobre el color dental. VITA Assist permite integrar los resultados de medición del VITA Easyshade V en fotografías digitales del paciente y ofrece herramientas adicionales de edición de imágenes, así como diversas funciones de comentario. Mediante la base de datos se pueden gestionar los casos clínicos y se puede intercambiar información entre la clínica y el laboratorio de manera eficiente.

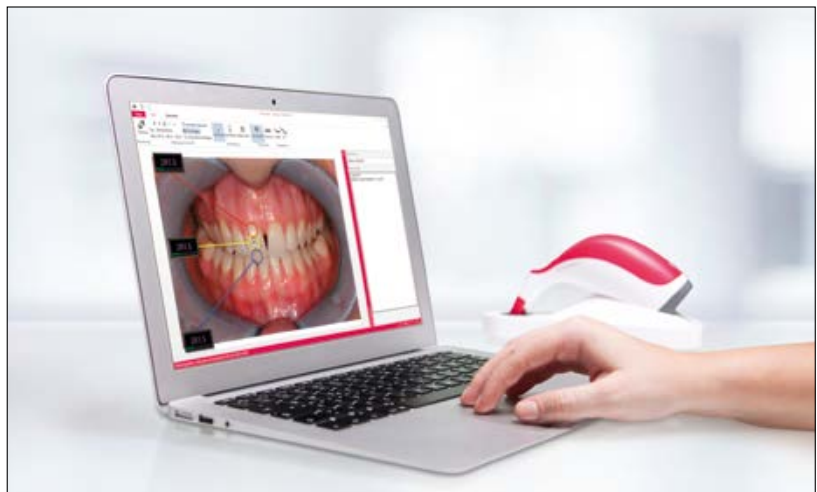


# Un aparato. Incontables aplicaciones.




Determinación del color básico para seleccionar los materiales para el tratamiento de obturación directa

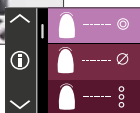


Determinación del color dental para la realización de un blanqueamiento.

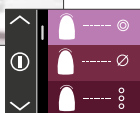


Determinación del color promedio para dientes multicromáticos

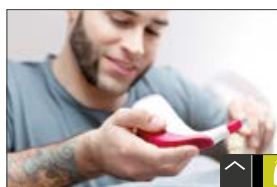

Determinación del color de la restauración ya durante su confección

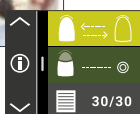


Determinación intraoral del color de restauraciones cerámicas existentes

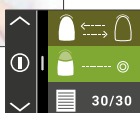


Comunicación a través de la aplicación VITA mobileAssist


Determinación del color básico para seleccionar los dientes protésicos

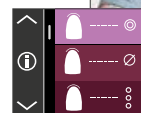


Determinación del color dental para seleccionar los materiales CAD/CAM

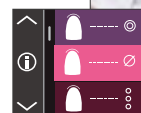

Determinación del color de zonas dentales para restauraciones cerámicas estratificadas

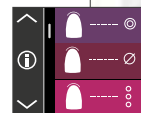

Comprobación de la calidad en cuanto al color deseado de restauraciones cerámicas terminadas

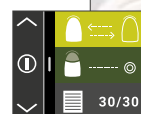

Comunicación a través de VITA Assist




# Sistemas VITA.

## Soluciones óptimas para el proceso de elaboración



\* Nota "Pasos de proceso/cocción opcionales": la cerámica de feldespato y la cerámica híbrida son materiales que pueden colocarse inmediatamente después de fresar y pulir. Por lo tanto, los pasos del proceso de la cerámica de feldespato arriba indicados son opcionales. Lo anterior se aplica también a la cerámica híbrida, salvo por el hecho de que ésta no se debe cocer. En el caso del dióxido de circonio, antes de la caracterización/personalización se lleva a cabo la cocción de sinterización.

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER® permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

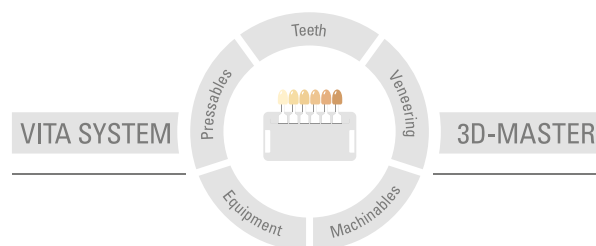

**Nota importante:** nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 04.19

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Easyshade® V lleva el marcado CE conforme a las Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE y 2011/65/CE.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)