


VITA Easyshade® V

Détermination optimale des couleurs, sécurité maximale.

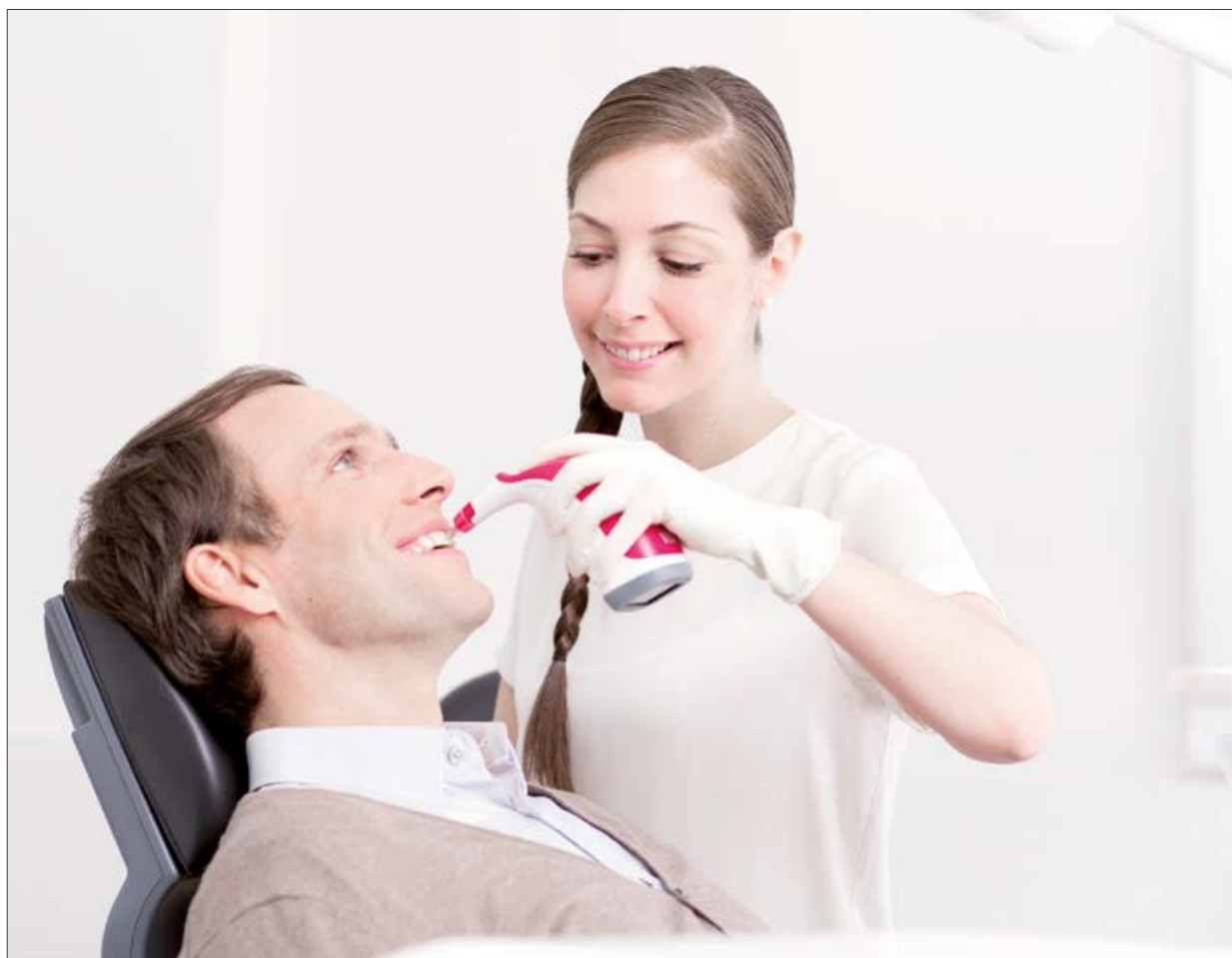

Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 04.19



VITA – perfect match.

VITA

"Déterminer et communiquer les couleurs de dents de façon rentable, c'est possible
uniquement numériquement – au mieux avec le VITA Easyshade® V."

Dr chir. dent. Philipp Grohmann (prothésiste dentaire)



VITA Easyshade® V

Détermination très précise de la couleur. Reproduction sûre de la couleur.

VITA Easyshade V est un appareil numérique de mesure de la couleur pour une détermination de la couleur dentaire précise, rapide et fiable, qui peut être utilisé pour des dents naturelles, ainsi que pour des restaurations céramiques stratifiées.

Le VITA Easyshade V seconde les dentistes et les prothésistes depuis la détermination et la communication de la couleur de la dent jusqu'à la reproduction, en passant par le contrôle chromatique de la restauration céramique achevée. Il améliore ainsi la sécurité du processus.

VITA Easyshade V

- **Transmission fiable et précise des informations sur la couleur des dents**
grâce à une technique de mesure intelligente et objective
- **Détermination de la couleur en quelques secondes permettant des gains de temps et d'argent**
grâce à l'obtention des résultats de mesure d'un simple clic
- **Sélection de matériau et reproduction de la couleur sûres**
grâce à des informations exactes et détaillées sur la couleur des dents
- **Transmission simple des informations sur la couleur des dents et les images**
au laboratoire avec le logiciel ou l'application



VITA Easyshade® V

Un appareil. Multiples applications possibles.

VITA Easyshade V offre aux cabinets dentaires et aux laboratoires un appui efficace et fiable dans :

- la détermination précise de la couleur des dents naturelles et des restaurations stratifiées,
- le choix optimal des matériaux de restauration adaptés,
- la planification et la documentation professionnelles du blanchiment dentaire,
- le contrôle de la qualité des restaurations en céramique stratifiée par rapport à la couleur dentaire finale,
- la communication fluide entre le cabinet dentaire et le laboratoire.

Détails du produit

- Spectrophotomètre compact et ergonomique à l'écran tactile d'utilisation intuitive avec chargeur
- Technique de mesure moderne pour la détermination de la couleur de base et des couleurs des différentes zones dentaires
- Sortie des résultats dans tous les standards de couleur VITA de même que l'indice de blanchiment selon l'American Dental Association (ADA)
- Affichage des valeurs de laboratoire et LCH
- Interface Bluetooth pour une communication sans fil avec le logiciel et l'appli connexes




VITA mobileAssist. La façon simple de communiquer.

L'application VITA mobileAssist permet la transmission simple et efficace de la couleur de la dent entre le cabinet dentaire et le laboratoire. Via une interface Bluetooth interne, les données sont transférées du VITA Easyshade V à l'application, où elles sont associées à une photo du patient avant d'être transmises par courriel. Toutes les informations pertinentes sur la couleur de dent de même que les photos de patients peuvent être ainsi envoyées de façon mobile et pratique au moyen d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.



VITA Assist. Communication et documentation professionnelles des couleurs de dents pour le cabinet dentaire et le laboratoire.


Le logiciel sous Windows VITA Assist permet de documenter et de gérer de façon professionnelle les résultats dentaires et les informations sur la couleur des dents. VITA Assist permet l'intégration des résultats de mesure du VITA Easyshade V aux photos numériques des patients et offre en outre des outils supplémentaires de traitement des images de même que des fonctions de commentaire multiples. La base de données permet de gérer les cas de patients et d'échanger efficacement les informations entre le cabinet et le laboratoire.

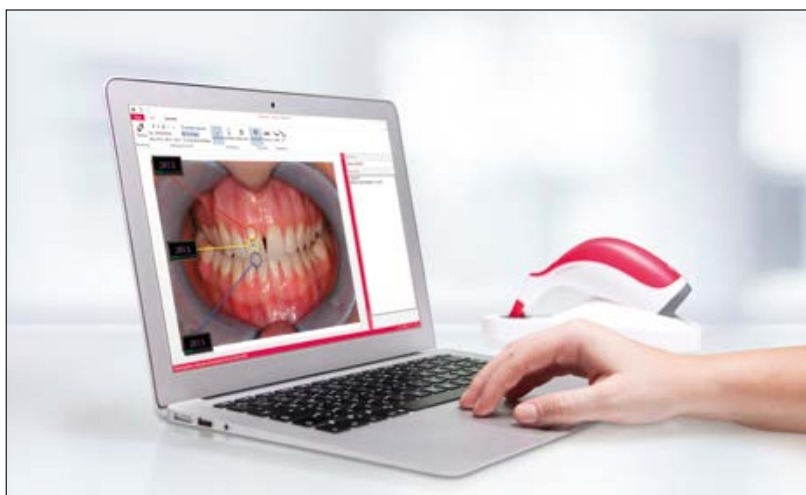


Un appareil. D'innombrables applications.




Détermination de la couleur de base pour choisir les matériaux dans le cadre des obturations au fauteuil

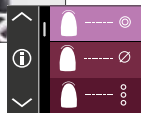


Détermination de la couleur de base pour le choix des dents artificielles

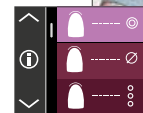

Détermination de la couleur de base pour les procédures de blanchiment

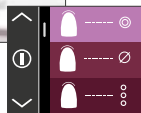



Détermination de la couleur pour choisir les matériaux CFAO

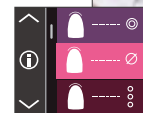


Détermination de la couleur moyenne pour des dents polychromes




Détermination de la couleur de chaque zone de la dent pour des restaurations stratifiées en céramique

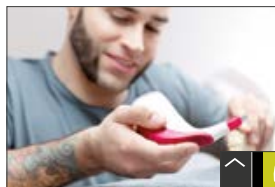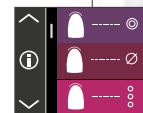


Détermination de la couleur de la restauration en cours de fabrication

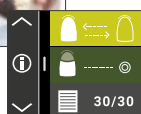

Contrôle de la couleur voulue des restaurations en céramique terminées

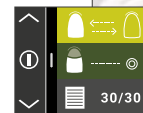

Détermination en bouche de la couleur des restaurations déjà existantes

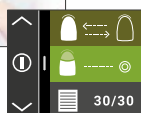

Communication via VITA Assist



Communication via l'application VITA mobileAssist


Systemes VITA.

Des solutions optimales pour l'usinage.



* Observation « Modification chromatique / Cuisson » : les céramiques feldspathique et hybride peuvent être posées directement après usinage et polissage. Pour la céramique feldspathique les étapes mentionnées ci-dessus sont facultatives. En principe, il en est de même pour la céramique hybride pour qui la cuisson est interdite. Avec l'oxyde de zirconium, on effectue une cuisson de frittage avant l'individualisation/personnalisation.

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER® permet de déterminer d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.

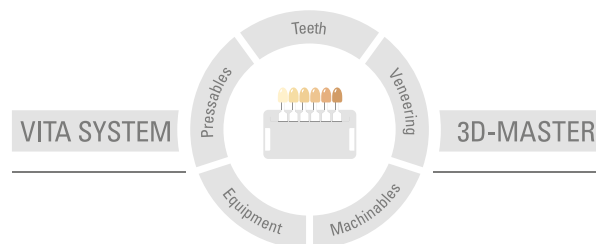

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 04.19

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Easyshade® V bénéficie du marquage CE conformément à la directive CE 2006/95/Ce, 2004/108/CE et 2011/65/CE.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)