

VITA SMART.FIRE

Die effiziente Brenneinheit für Chairside-Versorgungen



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 06.19

VITA – perfect match.

VITA

Produktbeschreibung

VITA SMART.FIRE ist eine speziell für die Zahnarztpraxis entwickelte Brenneinheit für Kristallisations-, Glanz-, Malfarben- und Korrekturbrände aller gängigen Chairside-Materialien. Materialwahl und Programmstart erfolgen in nur einem

Schritt. Für die einfache Brandführung sind materialspezifisch ideal abgestimmte Programme bereits vorinstalliert. Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sich die Brenneinheit besonders platzsparend und ganz bequem in jeder Praxis aufstellen.

VITA SMART.FIRE SYSTEM – ALLE LÖSUNGEN AUF EINEN BLICK



integriertes
Zubehör-Set

Chairside-Brenneinheit

Bedienelement

Was?

- VITA SMART.FIRE ist eine speziell für die Zahnarztpraxis entwickelte Brenneinheit für Kristallisations-, Glanz-, Malfarben- und Korrekturbrände aller gängigen Chairside-Materialien.

Wofür?

- Die Brenneinheit wird mittels Touch-Bedienelement gesteuert. Für die einfache Brandführung sind materialspezifisch ideal abgestimmte Programme bereits vorinstalliert.

Womit?

- Das VITA SMART.FIRE SYSTEM umfasst die Brenneinheit, das Bedienelement sowie ein integriertes Zubehör-Set

VORTEILE

TOUCH & FIRE!

*Vorinstalliertes Programm auswählen,
Brandführung direkt starten – fertig!*



1. intuitive Bedienung

2. komfortabler Einsatz

3. verlässliche Funktion

TOUCH & FIRE

Intuitiv

- Intuitive Bedienung dank Materialwahl und Programmstart in einem Schritt
- Übersichtliche Menüführung mit selbsterklärenden Programmsymbolen

Komfortabel

- Vorinstallierte Programme für alle gängigen Chairside-Materialien
- Komfortabler Einsatz durch besonders platzsparende Bauweise

Verlässlich

- Zuverlässige Funktion durch langlebige Brenntechnik
- Beständiges Gehäuse mit versiegelten Oberflächen

DIE VITA SMART.FIRE KOMponentEN – Die Brenneinheit



VITA SMART.FIRE Brenneinheit

Was?

- Platzsparende Chairside-Brenneinheit für komfortablen Einsatz
- Langlebige, robuste Brenntechnik für zuverlässige Funktion
- Beständiges Gehäuse mit versiegelten Oberflächen für einfache Reinigung
- Integrierte Service-Schublade für stets griffbereites Zubehör wie z.B. Brennträger
- Vollautomatische Temperaturkalibrierung für verlässliche Ergebnisse

Wofür?

- Für Kristallisations-, Glanz-, Malfarben- und Korrekturbrände

DIE VITA SMART.FIRE KOMponentEN – Das Bedienelement



VITA SMART.FIRE Bedienelement


Was?

- Bedienelement mit vorinstallierten Programmen für alle gängigen Chairside-Materialien
- Hochauflösendes 10-Zoll-Touch-Display für perfekte Bedienung und beste Bildqualität
- Intuitives Bedienkonzept für Materialwahl und Programmstart in einem Schritt
- Übersichtliches Menü mit selbsterklärenden Symbolen für schnelle Programmwahl
- Softwarebasierte Assistenzfunktion für gestützte Schritt-für-Schritt-Brandführung

Wofür?

- Für die intuitiv-einfache Brandführung

DIE VITA SMART.FIRE KOMponentEN – Das Zubehör

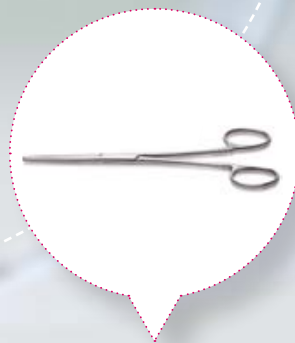

VITA SMART.FIRE Zubehör


Was?

- In Brenneinheit integriertes Zubehör-Set zur komfortablen Brandführung
- Bestandteile: Brenngutträger, Wattebrenngutträger, Platinstifte, Brenngutzange und Abkühltisch

Wofür?

- So hat das Praxisteam direkt an der Brenneinheit alles Wichtige stets griffbereit


PRODUKT- UND SYSTEMÜBERSICHT

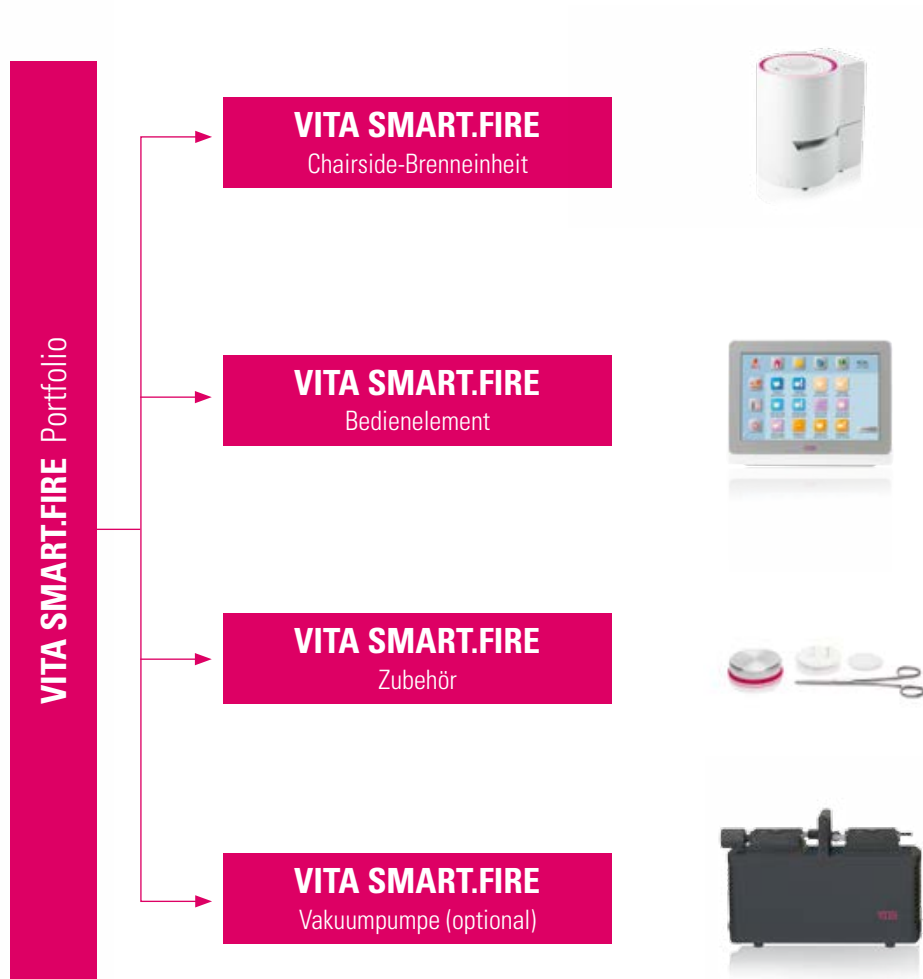

VITA SMART.FIRE

Bezeichnung	Maße	Technische Daten	Lieferumfang	Art.-Nr.
Chairside-Brenneinheit	Gehäuse ø 230 mm T: 300 mm H: 340 mm Brennkammer ø 80 mm H: 43 mm	Elektrischer Anschluss: 230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 950 W Brennkammertemperatur: 1050 °C	1x Brenneinheit 1x Zubehör-Set 1x Bedienungsanleitung	DSF220 (230V-Version) DSF100 (100V-Version) DSF110 (110V-Version)
Bedienelement	B: 260 mm T: 150 mm H: 200 mm	TFT-Touch-Display 10 Zoll, 1280 x 800 USB-/SD-Schnittstellen	1x Anschlusskabel	
Zubehör	–	–	2x Platinstifte 1x Wattebrenngutträger 1x Brenngutträger 1x Brenngutzange 1x Abkühltisch	
Vakuumpumpe (optional)	–	–	1x Vakuumpumpe 1x Vakuumschlauch	DVPU220

Weitere Informationen zu VITA SMART.FIRE
finden Sie unter: www.vita-zahnfabrik.com

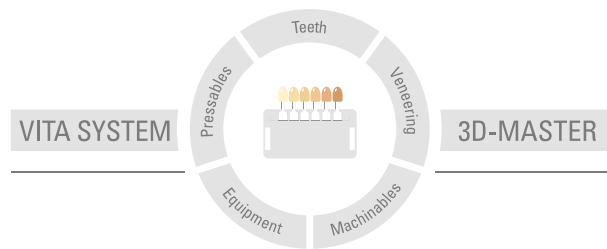

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 06.19

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE ist CE gekennzeichnet im Sinne der EG-Richtlinie 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2011/65/EG.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik