

VITA SMART.FIRE

L'efficiente unità di cottura per riabilitazioni chairside



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 06.19

VITA – perfect match.

VITA

Descrizione del prodotto

VITA SMART.FIRE è un'unità di cottura sviluppata specialmente per lo studio odontoiatrico per cotture di cristallizzazione, di glasura, dei supercolori e di correzione di tutti i correnti materiali chairside. Selezione del materiale e avvio del programma si effettuano in un'unica operazione. Per semplifica-

re le cotture, i programmi specifici per materiale sono già preinstallati. Grazie alla costruzione compatta, l'unità di cottura ha un ingombro particolarmente ridotto e si posiziona agevolmente in qualsiasi studio.

VITA SMART.FIRE SYSTEM – TUTTE LE SOLUZIONI IN UN COLPO D'OCCHIO



Set accessori integrato

Unità di cottura da studio

Unità di comando

Cosa?

- VITA SMART.FIRE è un'unità di cottura sviluppata specialmente per lo studio odontoiatrico per cotture di cristallizzazione, di glasura, dei supercolori e di correzione di tutti i correnti materiali chairside.

Per cosa?

- L'unità di cottura è gestita da un'unità di comando touch. Per semplificare le cotture, i programmi specifici per materiale sono già preinstallati.

Con cosa?

- Il VITA SMART.FIRE SYSTEM comprende l'unità di cottura, l'unità di comando ed il set accessori integrato.

VANTAGGI

TOUCH & FIRE!

*Selezionare il programma preinstallato,
avviare direttamente la cottura – fatto!*



1. uso intuitivo

2. confort

3. affidabilità

TOUCH & FIRE

Intuitivo

- Uso intuitivo grazie alla scelta del materiale e all'avvio del programma in un'unica operazione
- Chiara guida a menu con simboli programmi autoesplicativi

Confortevole

- Programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
- Confort d'uso grazie alla costruzione particolarmente compatta

Affidabile

- Funzionamento affidabile grazie alla tecnica di cottura di lunga durata
- Custodia resistente con superfici sigillate

COMPONENTI VITA SMART.FIRE –

Unità di cottura



Per tutte le cotture ed i materiali correnti

Unità di cottura **VITA SMART.FIRE**

Cosa?

- Unità di cottura da studio di ingombro ridotto e uso confortevole
- Tecnica di cottura robusta, di lunga durata per un funzionamento affidabile
- Custodia resistente con superfici sigillate per una facile detersione
- Cassetto Service integrato per avere a portata di mano gli accessori, ad es. il supporto di cottura
- Taratura completamente automatica della temperatura per risultati affidabili

Per cosa?

- Per cotture di cristallizzazione, di glasura, dei supercolori e di correzione

COMPONENTI **VITA SMART.FIRE** –

Unità di comando



Unità di comando **VITA SMART.FIRE**


Cosa?

- Unità di comando con programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
- Touch-display da 10", ad alta risoluzione per una perfetta gestione e immagini di ottima qualità
- Concetto di utilizzo intuitivo per la scelta del materiale e l'avvio del programma in un'unica operazione
- Chiaro menu con simboli autoesplicativi per una rapida selezione dei programmi
- Funzione di assistenza basata su software per un supporto passo-passo al ciclo di cottura

Per cosa?

- Per cotture semplici e intuitive

COMPONENTI **VITA SMART.FIRE** – Accessori

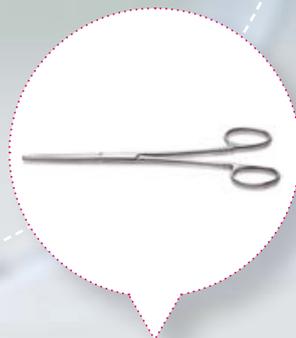

Accessori **VITA SMART.FIRE**


Cosa?

- Set accessori integrato nell'unità di cottura per il massimo confort operativo
- Comprendente: supporto di cottura, cotone refrattario, perni di platino, pinza e piano di raffreddamento

Per cosa?

- In tal modo il team dello studio ha sempre tutto pronto in prossimità del forno


RIEPILOGO PRODOTTI E SISTEMA

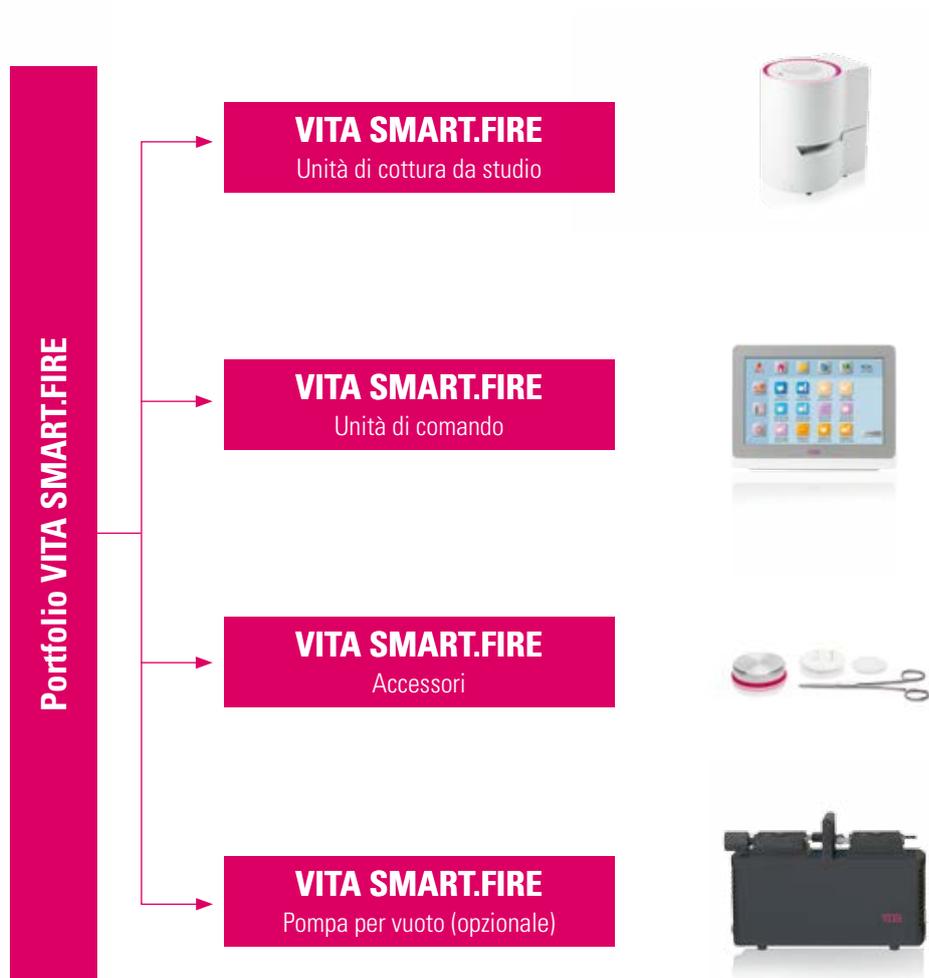

VITA SMART.FIRE

Denominazione	Dimensioni	Dati tecnici	Dotazione	Cod.
Unità di cottura da studio	Custodia ø 230 mm P: 300 mm A: 340 mm Camera di cottura ø 80 mm A: 43 mm	Allacciamento elettrico: 230 Volt AC, 50 Hz oppure 100/110 Volt AC, 50/60 Hz Potenza assorbita: 950 W Temperatura camera di cottura: 1050 °C	1x unità di cottura 1x set accessori 1x istruzioni d'uso	DSF220 (versione 230 V) DSF100 (versione 100 V) DSF110 (versione 110 V)
Unità di comando	L: 260 mm P: 150 mm A: 200 mm	TFT-touch-display 10", 1280 x 800 porte USB/SD	1x cavo di collegamento	
Accessori	–	–	2x perni di platino 1x cotone refrattario 1x supporto di cottura 1x pinza 1x piano di raffreddamento	
Pompa per vuoto (opzionale)	–	–	1x pompa per vuoto 1x tubo per vuoto	DVPU220

Per ulteriori informazioni su VITA SMART.FIRE
consultare: www.vita-zahnfabrik.com

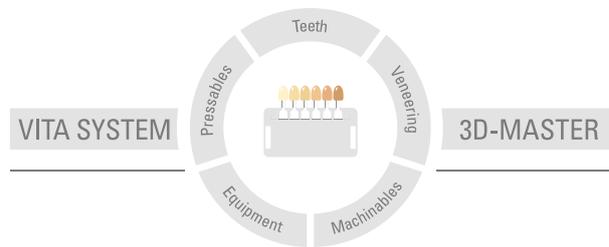

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 06.19

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE è marcato CE in conformità alla Direttiva CE 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2011/65/CE.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik