

VITA SMART.FIRE

Эффективная печь для работы в клинике



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 06.19

VITA – perfect match.

VITA

Описание продукта

Специально для работы в клинике была разработана печь VITA SMART.FIRE. С ее помощью можно проводить кристаллизационный, глянцеобразующий и корректировочный обжиг, а также обжиг красителей для всех стандартных Chairside-материалов. Выбор материала

и пуск программы осуществляется за один шаг. А предустановленные программы, идеально согласованные с материалами, упростят проведение обжига. Благодаря компактному дизайну печь легко найдет свое место в любой клинике.

VITA SMART.FIRE SYSTEM – ДЛЯ ВСЕХ ПОКАЗАНИЙ



Интегрированный набор принадлежностей

Chairside-печь

Пульт управления

Что?

- Специально для работы в клинике была разработана печь VITA SMART.FIRE. С ее помощью можно проводить кристаллизационный, глянцеобразующий и корректировочный обжиг, а также обжиг красителей для всех стандартных Chairside-материалов.

Для чего?

- Печь управляется посредством сенсорного пульта управления. А предустановленные программы, идеально согласованные с материалами, упростят проведение обжига.

С помощью чего?

- VITA SMART.FIRE SYSTEM включает печь, пульт управления, а также интегрированный набор инструментов

ПРЕИМУЩЕСТВА

TOUCH & FIRE!

Выбрать и сразу запустить программу обжига - готово!

1. Интуитивное управление

2. Удобное использование

3. Надежная функциональность

TOUCH & FIRE

Интуитивность

- Интуитивное управление благодаря выбору материала и пуску программы в один шаг
- Меню с самообъясняющими символами для быстрого выбора программы

Удобство

- Предварительно установленные программы для всех стандартных врачебных материалов
- Простое и легкое применение благодаря компактному дизайну

Надежность

- Надежная работа благодаря долговечности конструкции
- Прочный герметичный корпус

КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE

Печь



Печь VITA SMART.FIRE

Что?

- Компактная печь для простого применения в клинике
- Долговечная, прочная конструкция печи для надежной работы
- Устойчивый корпус с герметичными поверхностями для простого ухода
- Интегрированный выдвижной ящик для инструментов
- Полностью автоматическая настройка температуры для надежных результатов

Для чего?

- Для кристаллизационного, глянцеобразующего и корректировочного обжига, а также обжига красителей

КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE

Пульт управления



Пульт управления **VITA SMART.FIRE**


Что?

- Пульт управления с предустановленными программами для всех стандартных Chairside-материалов
- 10-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением для наилучшего качества изображения
- Интуитивная концепция управления для выбора материала и пуска программы в один шаг
- Меню с самообъясняющимися символами для быстрого выбора программы
- Функция ассистента для поэтапного обжига

Для чего?

- Для интуитивно понятного, простого обжига

КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE Принадлежности

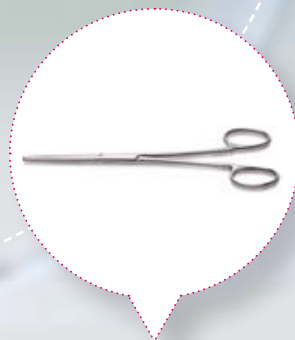

Принадлежности VITA SMART.FIRE


Что?

- Интегрированный набор инструментов для комфортного обжига
- В набор входят: обжиговый трегер, ватный трегер, платиновые штифты, печные щипцы и столик для охлаждения

Для чего?

- Таким образом все необходимое находится всегда под рукой


Обзор продуктов и систем

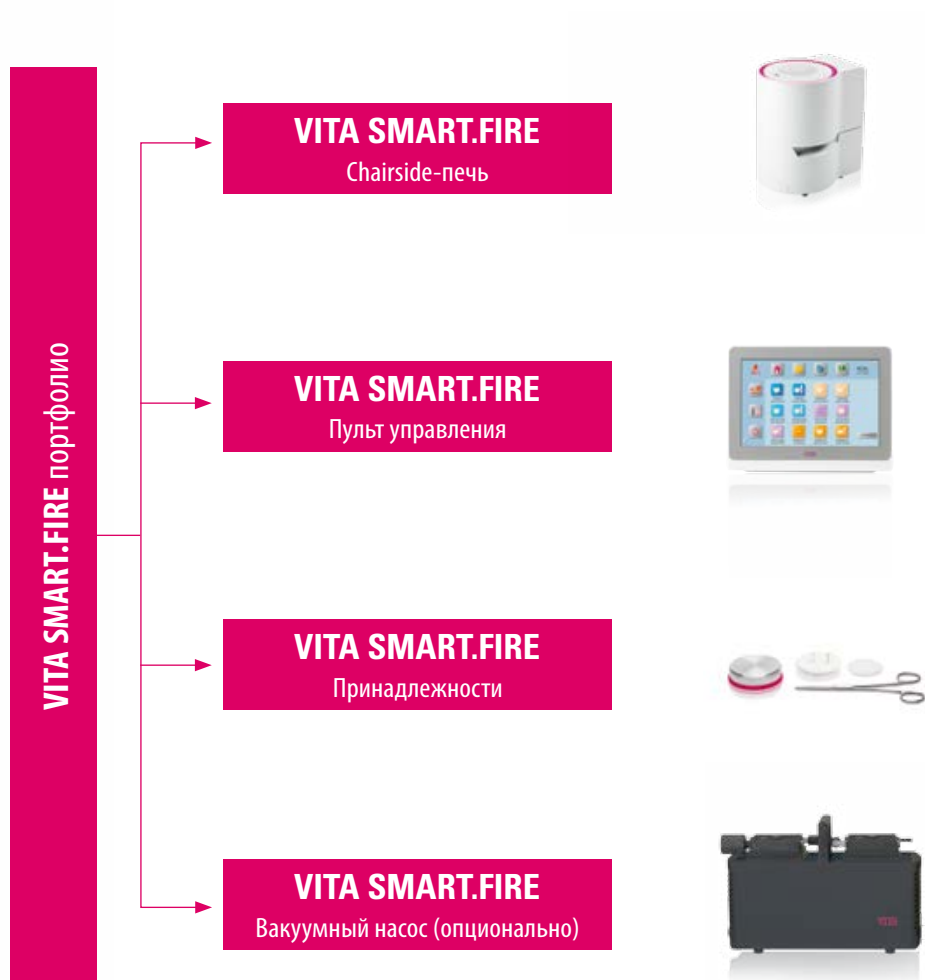

VITA SMART.FIRE

Наименование	Размеры	Технические характеристики	Объем поставки	Кат. №
Chairside-печь	Корпус ø 230 мм Т: 300 мм Н: 340 мм Камеры обжига ø 80 мм Н: 43 мм	Электрическое подключение: 230 Вольт AC, 50 Гц или 100/110 Вольт AC, 50/60Гц Мощность: 950 Вт Температура камеры обжига: 1050 C	1x печь 1x набор принадлежностей 1x инструкция	DSF220 (230V-Version) DSF100 (100V-Version) DSF110 (110V-Version)
Пульт управления	Ш: 260 мм Г: 150 мм В: 200 мм	TFT-Touch-дисплей 10 дюймов, 1280 x 800 USB-/SD-интерфейс	1 x электрический сетевой кабель	
Принадлежности	—	—	2x платиновые штифты 1x ватный обжигový трегер 1x обжигový трегер 1x печные щипцы 1 x столик для охлаждения	
Вакуумный насос (опционально)	—	—	1x вакуумный насос 1x вакуумный шланг	DVPU220

Более подробную информацию о VITA SMART.FIRE Вы можете найти на сайте: www.vita-zahnfabrik.com

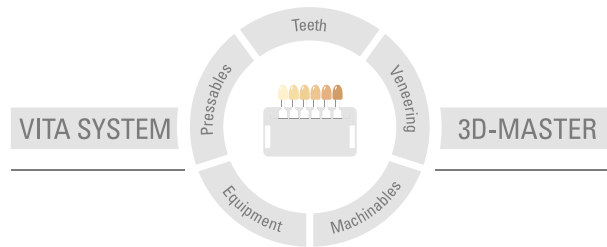

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 06.19

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE ist CE отмечен знаком CE в соответствии с директивой EG 2006/95/EG, 2004/108/EG и 2011/65/EG.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik