

VITA AKZENT® Plus

Information produit



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 11.19

VITA – perfect match.

VITA

Optimisation. Simplicité. Exhaustivité.
Lasure, coloration et glaçure, indépendamment
du coefficient de dilatation thermique (CDT)

VITA AKZENT® Plus **Optimisation. Simplicité. Exhaustivité.**



Une plus grande latitude pour le cabinet dentaire et le laboratoire

Vous voulez lasurer, colorer et glacer d'une manière simple et efficace ?
Alors l'assortiment VITA AKZENT Plus est fait pour vous.

Le système composé de masses pour la lasure, la coloration et le glaçage vous
donne toute la latitude requise au cabinet dentaire et au laboratoire.

Le produit est conçu pour toutes les céramiques dentaires et pour tous les CDT.

De nouvelles couleurs, de nouvelles formes d'application, de nouvelles indications
– avec VITA AKZENT Plus vous êtes maître à bord.

En poudre, en pâte ou en spray, vous décidez vous-même comment utiliser
VITA AKZENT Plus pour une rentabilité maximale.

VITA AKZENT® Plus SPRAY Application régulière en appuyant sur un bouton



AKZENT Plus SPRAY KIT		
Contenu		
Produit	Couleur	Contenu
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75 ml
GLAZE SPRAY		1 x 75 ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75 ml
FLUOGLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
Accessoires		



Particulièrement indiqué pour les prothésistes et dentistes souhaitant par ex. retoucher la couleur des restaurations monolithiques.

Les colorants de type glaçure et lasure en spray sont prêts à l'emploi et faciles à appliquer.

FLUOGLAZE LT est une glaçure hautement fluorescente en spray pour une fluorescence naturelle.

Avantages

- Application régulière pour un traitement de surface simple et homogène.
- Vaporisation précise sans dispersion grâce à un nouvel embout de vaporisation étudié à cet effet.



VITA AKZENT® Plus POWDER associe la flexibilité et l'individualité à la productivité



VITA AKZENT Plus POWDER KIT		
Contenu		
Produit	Couleur	Contenu
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3 g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3 g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3 g
GLAZE		1 x 5 g
GLAZE LT		1 x 5 g
FINISHING AGENT		1 x 5 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml
Accessoires		

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER		
Contenu		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4		
Contenu		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



Les masses VITA AKZENT Plus POWDER conviennent très bien aux prothésistes souhaitant caractériser les céramiques cosmétiques classiques et la céramique feldspathique à structure fine VITA PM 9.

Avantages

- Flexibilité et rentabilité sans limite.
- Miscibles entre elles pour créer des effets chromatiques personnalisés.
- Adaptation simple et rapide des rendu de couleur, chromaticité et intensité de couleur.



VITA AKZENT® Plus PASTE Personnalisation très rapide



VITA AKZENT Plus PASTE KIT		
Contenu		
Produit	Couleur	Contenu
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4 g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4 g
GLAZE PASTE		1 x 4 g
GLAZE LT PASTE		1 x 4 g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml
Accessoires		

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER		
Contenu		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4		
Contenu		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



Les colorants VITA AKZENT Plus PASTE sont parfaits pour caractériser vite et bien les restaurations par ex. en VITABLOCS.

Avantages


- Pâtes prêtes à l'emploi d'une consistance régulière et d'une pigmentation homogène pour une application rapide.
- Miscibles entre elles pour créer des effets de couleur personnalisés.
- Possibilité de diluer ou mélanger à nouveau les pâtes.
- Adaptation simple et rapide des rendu de couleur, chromatocité et intensité de couleur.



Le VITA AKZENT Plus PASTE FLUID assure ou rétablit une consistance parfaite si les pâtes ont séché.



AKZENT Plus Palette de couleurs Assortiment						
Produit	Échantillon de couleur	Couleur	Désignation courte	Conditionnement		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – Lasures translucides – Pour modifier le rendu de teinte du matériau de base		jaune	BS01	✓	✓	✓
		brun-jaune	BS02			
		orange	BS03			
		gris-olive	BS04			
		brun-gris	BS05			
CHROMA STAINS classical A1–D4 – Lasures colorées pour modifier la chromaticité du matériau de base au sein d'un groupe de couleurs		rougeâtre-brunâtre	CSA		✓	✓
		jaunâtre-rougeâtre	CSB			
		grisâtre	CSC			
		grisâtre-rougeâtre	CSD			
CHROMA STAINS 3D-MASTER – Lasures colorées pour modifier la chromaticité du matériau de base au sein d'un groupe de luminosités		jaunâtre	CSL		✓	✓
		jaunâtre-rougeâtre	CSM2			
		jaune-rouge	CSM3			
		rougeâtre	CSR			
		orange	CSIO			
EFFECT STAINS – Colorants très couvrants – Pour des effets de surface naturels – Pour colorer en cours de stratification		blanc	ES01			
		crème	ES02			
		jaune citron	ES03			
		jaune vif	ES04			
		orange	ES05			
		rouille	ES06			
		kaki	ES07			
		rose	ES08			
		rouge foncé	ES09			
		lilas	ES10			
		bleu	ES11			
		gris-bleu	ES12			
		gris	ES13			
		noir	ES14			
GLAZE – Pour des surfaces brillantes et homogènes				✓	✓	✓
GLAZE LT – Glaçure basse fusion pour céramiques avec une température de cuisson inférieure à 800 °C				✓	✓	✓
FINISHING AGENT – Pour des surface soyeuses					✓	✓

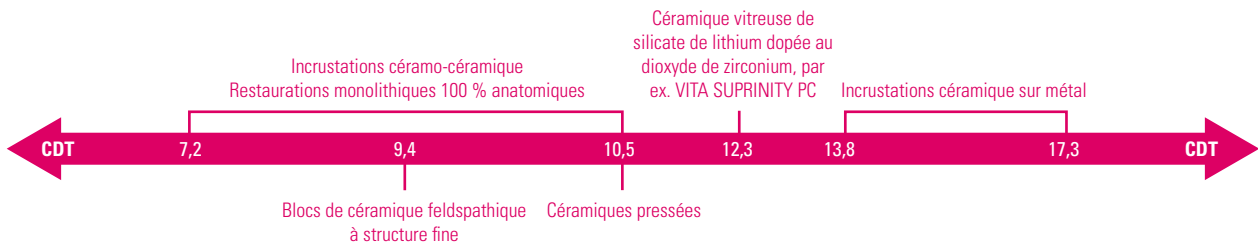

+ Blocs de céramique feldspathique à structure fine



+ Céramiques pressées

+ Un plus en matière de polyvalence

Lasurage

Nouveauté dans le système : colorants de type lasure (Body Stains). Les colorants translucides agissent comme un filtre coloré fin.

Ils sont remarquablement indiqués pour :

- maquillage de surface,
- modifier le rendu de couleur du matériau de base.

Marquage

Grain particulièrement fin : des colorants teintants (Effect Stains). Ces colorants se distinguent par :

- un rendu de couleur vif et
- un fort pouvoir couvrant.

Ils sont donc conseillés en particulier pour créer des effets de surface naturels et une coloration interne.

Glaçure


Pour un fini brillant :

- VITA AKZENT Plus GLAZE – la glaçure pour une surface brillante, homogène, s'apparentant à du verre,
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – la glaçure basse fusion pour céramiques avec une température de cuisson inférieure à 800 °C,
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – la lasure pour obtenir des surfaces incrustées soyeuses,
- VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT – glaçure hautement fluorescente en spray pour une fluorescence naturelle.

+ Un plus en matière de confort d'utilisation

Tous les colorants sont fluorescents, d'une extraordinaire finesse de grain et chromatiquement stables. La consistance thixotrope des poudres et des pâtes favorise la précision d'application des masses.

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de déterminer d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.

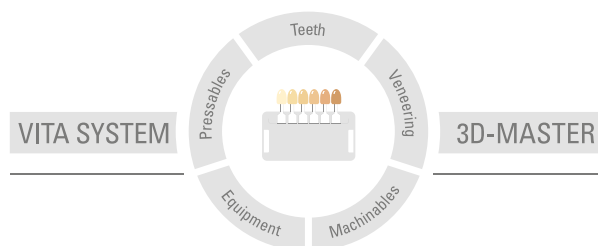

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 11.19

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage **CE 0124** :
VITA AKZENT® **Plus**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik