

# VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS

Rezultate estetice naturale, sclipitoare. De fiecare dată.



VITA Determinarea culorii

VITA Transmiterea culorii

VITA Reproducerea culorii

VITA Verificarea culorii

Data emiterii: 03.20



VITA – perfect match.

**VITA**

A close-up, soft-focus photograph of a woman's face, showing her eyes, nose, and a slight smile. She has dark hair and is wearing a yellow top. The background is a plain, light-colored wall.

## CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE

**VITA AMBRIA®** PRESS SOLUTIONS este un sistem de ceramică presată pentru rezultate estetice naturale. Pe lângă fidelitatea cromatică foarte bună și dinamica excelentă a luminii, ceramica presată se caracterizează și prin prelucrare eficientă.



▶ **VITA AMBRIA –**  
Cu totul excepțională. Culori naturale. Înaltă precizie.



## VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – NATURALEȚE, FIDELITATE CROMATICĂ ȘI FIABILITATE



VITA AMBRIA –  
Sistem de ceramică  
presată pentru rezultate  
estetice și durabile.



### Ce?

- Sistem de ceramică presată din disilicat de litiu întărit cu oxid de zirconiu pentru rezultate deosebit de estetice și durabile prin prelucrare eficientă

### Pentru ce?

- Pentru realizarea reconstrucțiilor delicate și deosebit de estetice, precum fațete și inlays/onlays, coroane totale/parțiale și punți cu trei elemente până la al doilea premolar

### Cu ce?

- Sistemul de ceramică presată include pastile ceramice în două grade de translucidență (T/HT) și două mărimi (S, L), sistem de conformatoare, masă de ambalat și lichid, precum și pistoane de presare



## SISTEMUL DE PRESARE CU COMPONENTE ARMONIZATE



### VITA AMBRIA®

- Pentru prelucrarea eficientă și fiabilă în mod constant, de la faza de ambalare la presare și fațetare, pentru fiecare etapă există componente armonizate ale sistemului

DETERMINAREA CULORII



MODELARE



AMBALARE



PRESARE



FAȘETARE\*



PICTURĂ



LUSTRIRE



**VITA AMBRIA –  
Eficiență în sistem.**

\*) Etapă opțională a procesului: nu se aplică la restaurările monolitice.

## AVANTAJE



▶ **VITA AMBRIA –  
Estetică, fiabilitate  
și înaltă precizie.**

### **Sclipitor**

- Joc sclipitor, multifățetat de culori și lumini datorită materialului cu transluciditate, opalescență și fluorescență naturală

### **Natural**

- Reproducere fiabilă a culorilor dentare datorită pastilelor de ceramică presată cu o foarte bună fidelitate cromatică și a componentelor perfect armonizate


### **Eficiență**

- Permite obținerea unor rezultate presate de mare precizie printr-un strat minim de reacție, deoarece masa de ambalat și materialul sunt perfect armonizate

### **Durabil**

- Restaurări extrem de rezistente, datorită ceramicii din disilicat de litiu întărită cu oxid de zirconiu de mare stabilitate (> 550 MPa)



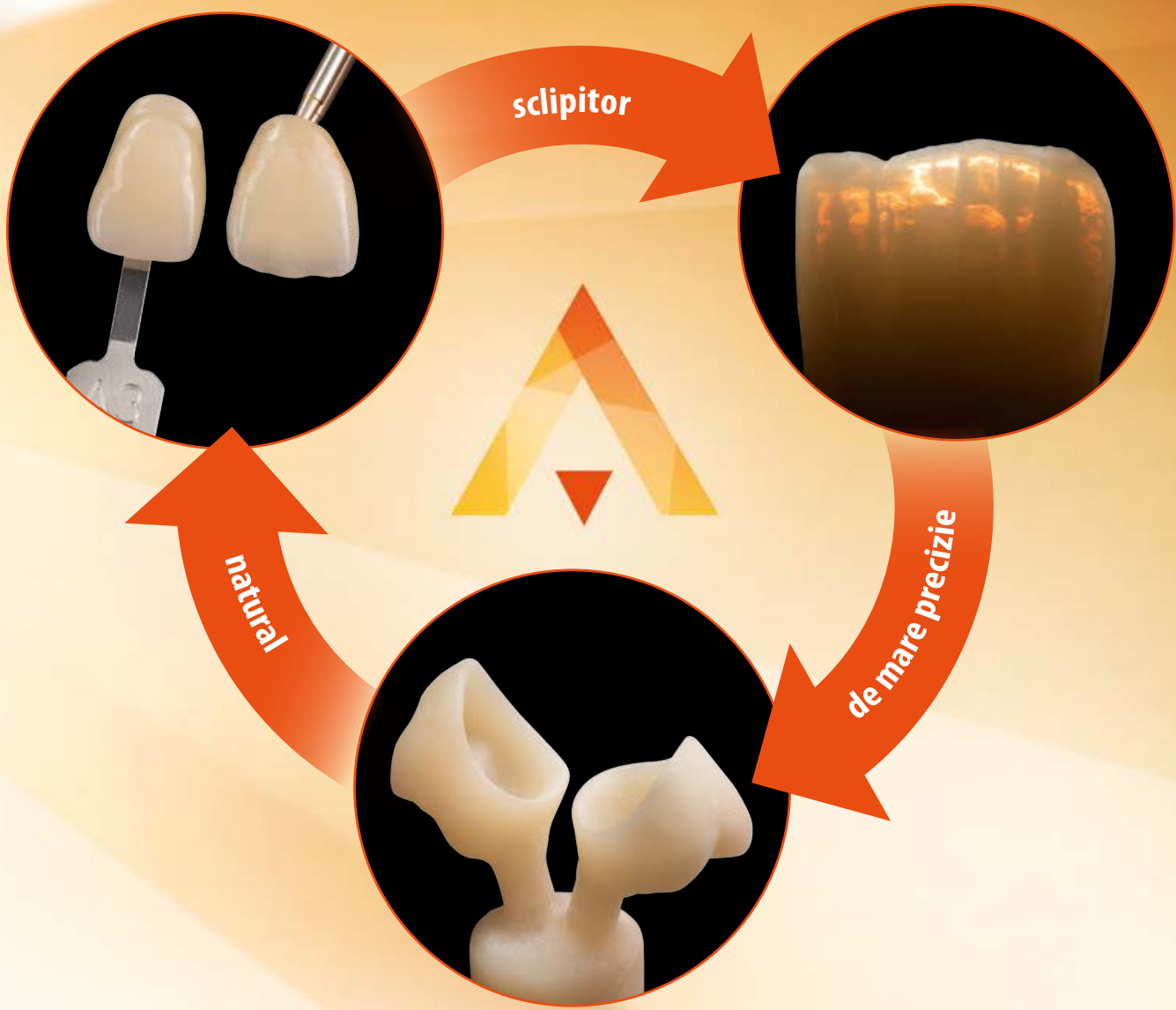

## DINAMICĂ EXCELENTĂ A LUMINII PENTRU RESTAURĂRI DEOSEBIT DE ESTETICE

VITA AMBRIA –  
Pentru un joc de lumini și  
culori cu reflexe multifățetate



### VITA AMBRIA®

- are o translucidență naturală pentru transmiterea ideală a luminii
- prezintă o opalescență integrată pentru un joc de nuanțe scilipitor
- prezintă o fluorescență naturală pentru un joc de lumini excelent



▶ transmitere ideală a luminii



▶ joc sclipitor de culori




▶ fluorescență naturală



## REPRODUCERE FIABILĂ ȘI EFICIENTĂ A CULORILOR DENTARE



◀ **VITA AMBRIA – potrivire perfectă.**  
Reproducere cromatică fiabilă,  
datorită pastilelor de ceramică presată  
cu o fidelitate cromatică excelentă.

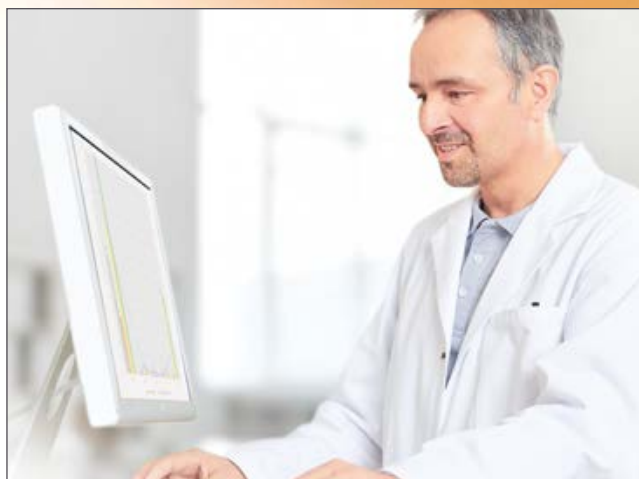

### Formulă cromatică precisă

- Datorită proceselor metrologice de înaltă precizie în elaborarea și realizarea pastilelor de ceramică presată VITA AMBRIA, fidelitatea cromatică este deosebită.



### Determinarea exactă a culorii

- Cu instrumentele vizuale și digitale VITA Zahnfabrik, culorile dentare se pot determina cu înaltă precizie.



### Reproducere exactă a culorii

- Determinarea precisă a culorii și fidelitatea cromatică a pastilelor de ceramică presată permit reproducerea eficientă și fidelă a culorii.



## REZULTATE DEOSEBIT DE PRECISE ȘI EFICIENTE



VITA AMBRIA Ceramică presată

### VITA AMBRIA®

- permite obținerea unor rezultate presate de mare precizie printr-un strat minim de reacție, deoarece masa de ambalat și materialul sunt perfect armonizate între ele
- permite finalizarea eficientă, deoarece stratul minim de reacție poate fi sablat rapid și ușor fără nevoia tratării ulterioare în baia de acid



VITA AMBRIA Masă de ambalat și lichid



masă de ambalat armonizată perfect  
fără strat de reacție




masă de ambalat convențională  
cu strat de reacție

## DURABILITATE ȘI LUSTRIRE REMARCABILĂ

### 1. Stabilitate ridicată pentru o durabilitate optimă

Rezistență biaxială

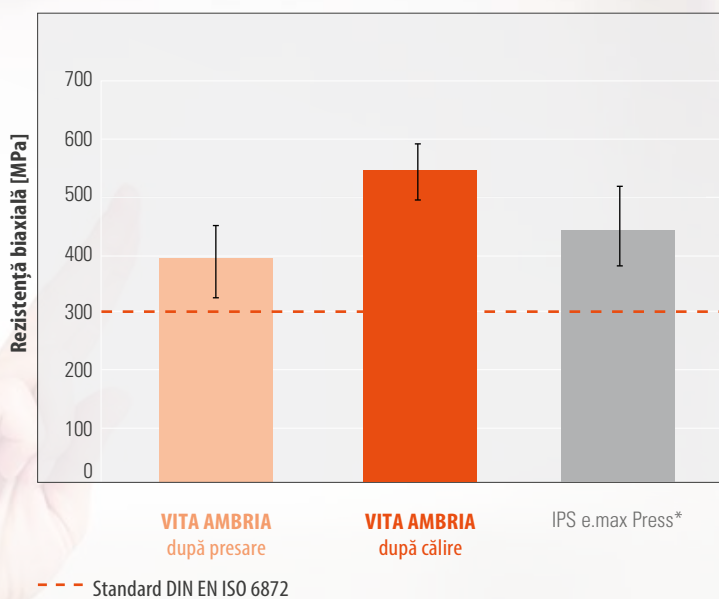

Sursa: Studii interne, VITA R&D, Măsurarea rezistenței biaxiale a materialelor sus-menționate în conformitate cu ISO 6872 (cu dimensiune modificată a mostrelor), (Gödiker, 1/2019, [1] vezi coperta prospectului)  
(\*) Nivelul rezistenței după procesul de presare. Călirea nu este specificată de producător.


#### VITA AMBRIA®

- oferă o durabilitate clinică foarte bună, de lungă durată, datorită stabilității ridicate
- atinge un nivel de stabilitate, cu o rezistență biaxială medie > 550 MPa (după călire), ceea ce depășește cerințele standard



## 2. Rezultate de lustruire eficiente pentru un luciu excelent

**1. Prelucrare cu  
instrumente diamantate**  
Suprafața după prelucrarea cu  
freza diamantată

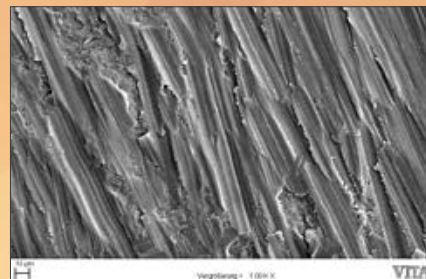

**2. Lustruire grosieră**  
Suprafața după  
lustruirea grosieră



**3. Lustruire fină**  
Suprafața după lustruirea  
cu o gumă de lustru fină



**VITA AMBRIA –  
Obțineți luciu intens  
rapid și eficient.**

Sursa: Studiu intern, VITA R&D,  
Imagini la microscop cu suprafața  
mostrei VITA AMBRIA, factor de  
mărire 1000, (Gödiker, 8/2019, [1]  
vezi coperta prospectului)

### VITA AMBRIA®

- poate fi lustruită eficient până la luciu intens datorită microstructurii omogene
- prezintă suprafețe omogene, netede, fără defecte în timpul testelor după trei etape de prelucrare (prelucrarea cu freza diamantată, lustruirea grosieră și fină)



A close-up, profile view of a man and a woman. The man, on the left, has dark hair and a beard, and is wearing an orange polo shirt. The woman, on the right, has dark hair and is wearing a yellow top. They are both looking towards each other, and the woman's hand is visible at the bottom right, holding a small object. The background is a bright, out-of-focus indoor setting.


## SISTEMUL ȘI COMPONENTELE

**VITA AMBRIA®** Pastilele de presare sunt disponibile într-o serie de variante și culori. Sistemul are și numeroase componente armonizate. Descoperiți acum întreaga gamă de materiale disponibile.



## ANSAMBLU DE VARIANTE, MĂRIMI ȘI CULORI

VITA AMBRIA tipuri/culori

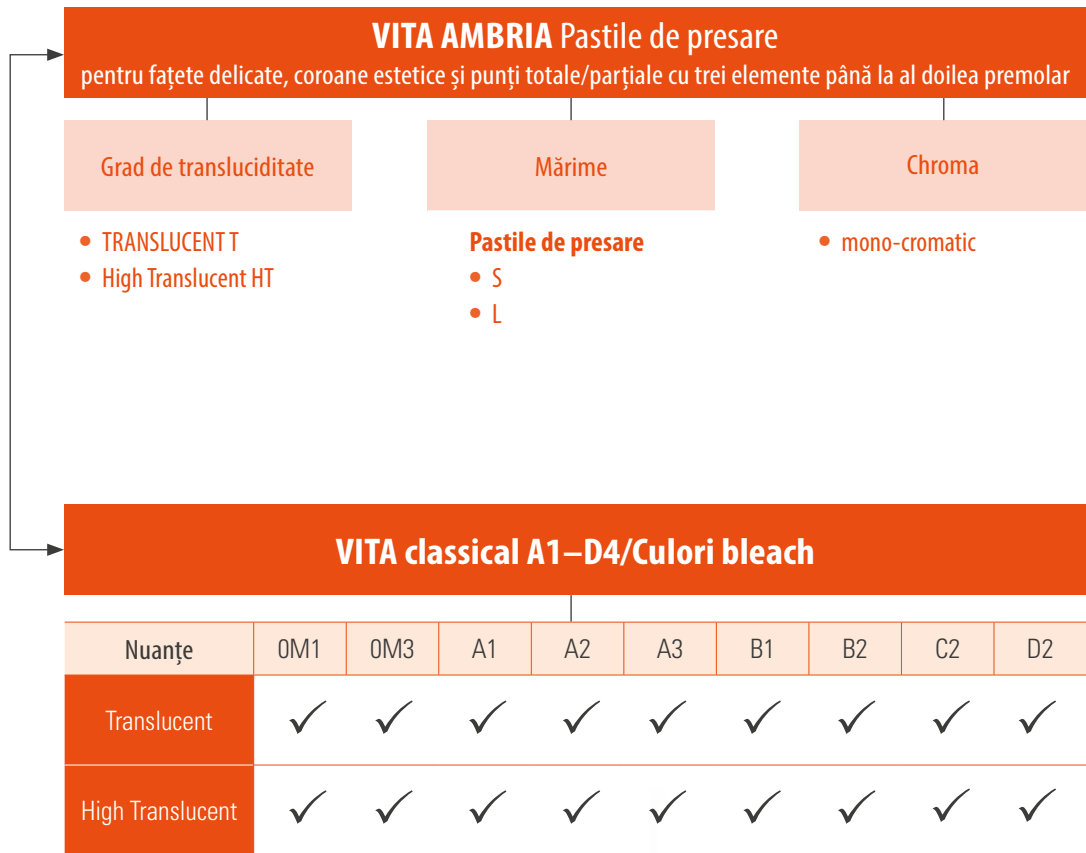

## COMPONENTE DE PRESARE ARMONIZATE



### Masă de ambalat/lichid

Masă de ambalat rapidă, fosfatică, armonizată perfect cu pastilele de presare VITA AMBRIA pentru controlul precis al expansiunii și fluidității.

VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: disponibil în pachete de 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F: disponibil în flacon de 1 l



### Sistem de conformatoare

Conformatoare conice, transparente, cu bază pentru plasarea și îndepărtarea ușoară a obiectelor; potrivite pentru toate cuptoarele de presare uzuale.

- VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM: disponibile pentru 100 g și 200 g



### Piston de presare

Pistoane de presare de unică folosință pentru manipulare ușoară, fără nevoia de sablare și pre-încălzire.


- PISTON VITA AMBRIA: disponibil în pachete de 50 de bucăți (diametru 13 mm)

## COMPONENTE DISPONIBILE



### Ambalare

VITA AMBRIA INVEST P + L  
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM

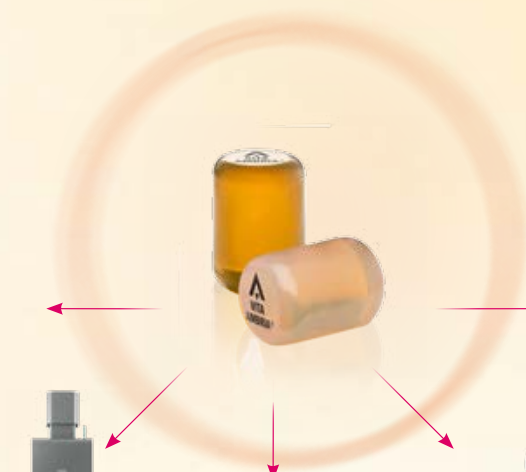

Pictură/Glazurare  
VITA AKZENT PLUS



### Presare

VITA VACUMAT 6000 MP  
VITA AMBRIA PISTON



### Lustruire

VITA SUPRINITY  
instrumente de lustruit



### Fațetare

VITA LUMEX AC

## SOLUȚII IDEALE PENTRU FLUXUL DE LUCRU



\*) Opțional: Fațetarea cu VITA LUMEX AC este o etapă opțională și nu este necesară la restaurările monolitice.

## NE FACE PLĂCERE SĂ VĂ AJUTĂM

Informații suplimentare despre produse și prelucrarea acestora sunt disponibile și pe [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)



### Hotline Asistență Vânzări

Dna. Carmen Holsten și echipa lui (Departamentul de Vânzări Interne) vă pot ajuta la plasarea comenzilor sau dacă aveți întrebări cu privire la livrare, produse sau materiale pentru marketing.

► Tel +49 (0) 7761 /56 28 84  
Fax +49 (0) 7761/56 22 99  
8.00 - 17.00 CET  
Email: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)



### Hotline tehnic

Dacă aveți întrebări tehnice cu privire la produsele VITA, puteți contacta specialiștii noștri tehnici DI. Ralf Mehlin sau DI. Daniel Schneider.

► Tel +49 (0) 7761/56 22 22  
Fax +49 (0) 7761/56 24 46  
8.00 - 17.00 CET  
Email: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)




Informații suplimentare despre VITA AMBRIA puteți găsi pe:  
[www.vita-zahnfabrik.com/ambria](http://www.vita-zahnfabrik.com/ambria)

#### 1. Referințe

##### 1. Studii interne, VITA R&D:

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Divizia Cercetare și Dezvoltare  
Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Michael Gödiker, inginer, director divizie R&D , Bad Säckingen

Pentru detalii privind datele testelor, vezi documentația științifică și tehnică  
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS  
Descărcați de pe [www.vita-zahnfabrik.com/ambria](http://www.vita-zahnfabrik.com/ambria)

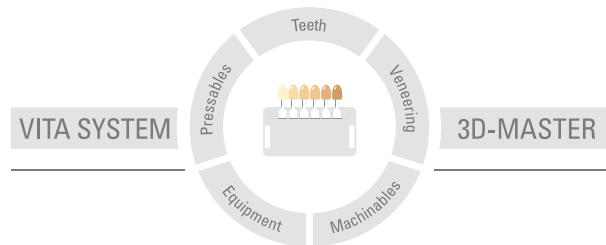

**Atenție:** Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucțiunilor de folosire. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte de utilizare dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil cu materialele și aparatele altui producător și din aceasta rezultă o pagubă. VITA Modulbox nu este neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucțiuni s-a făcut la: 03.20

Odată cu publicarea acestei ediții cu informații privind utilizarea, toate edițiile precedente își pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteți găsi la adresa [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik este o firmă certificată, iar următoarele produse poartă marca **CE 0124**:

#### VITA AMBRIA®

Produsele/sistemele altor producători menționate în acest document sunt mărci înregistrate ale producătorului respectiv.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)